

PT

Instruções de utilização  
**Dispenser DP 30 LipoPlus**

**NOUVAG<sup>+</sup>**



**PARABÉNS PELA SUA COMPRA DE UM PRODUTO DA NOUVAG.**

Estamos satisfeitos por ter escolhido um produto de qualidade da NOUVAG e agradecemos-lhe muito pela confiança que depositou em nós.

Estas instruções de utilização irão familiarizá-lo com o dispositivo e as suas funções, para que possa aplicá-las e utilizá-las correctamente.

**SÍMBOLOS**

Sinal de aviso geral



Ação obrigatória geral



Consultar o manual



Fabricante



Data de fabrico



Data de validade



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Não reutilizar



Recolha separada necessária (REEE)



Risco biológico



Não é fabricado com látex de borracha natural



Contém ou tem presente ftalato



Código do lote



Referência



Número de série



Dispositivo médico



Esterilizado utilizando óxido de etileno



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Resistência à água



Equipotencialidade




Indicação da direcção do fluxo da bomba



Peça aplicada tipo BF



Pedal

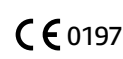

Selo de conformidade para a União Europeia



Certificado pelo TÜV Rheinland North America Group

---

## CONTEÚDO

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>UTILIZAÇÃO PRETENDIDA</b>                             | <b>4</b>  |
| Indicações médicas                                       |           |
| Contraindicações                                         |           |
| Efeitos secundários                                      |           |
| Utilizadores pretendidos                                 |           |
| Público alvo                                             |           |
| Condições ambientais                                     |           |
| <b>INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA</b>                          | <b>5</b>  |
| Alteração e utilização indevida                          |           |
| Requisitos essenciais                                    |           |
| Durante a utilização                                     |           |
| <b>INCLUÍDO NA ENTREGA</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO</b>                        | <b>7</b>  |
| Vista frontal                                            |           |
| Vista posterior                                          |           |
| <b>MANUTENÇÃO</b>                                        | <b>8</b>  |
| Instalação de dispositivos e acessórios                  |           |
| Conexão à fonte de alimentação                           |           |
| Ligação de equalização potencial de acordo com DIN 42801 |           |
| Preparação do dispositivo                                |           |
| <b>FUNCIONAMENTO</b>                                     | <b>10</b> |
| Ligar e desligar o dispositivo                           |           |
| Regulação do processo de infiltração                     |           |
| Bomba de tubo flexível                                   |           |
| Verificação funcional                                    |           |
| <b>LIMPEZA E DESINFEÇÃO</b>                              | <b>10</b> |
| Unidade de controlo e pedal                              |           |
| Conjunto de tubos REF 6022                               |           |
| <b>MANUTENÇÃO</b>                                        | <b>11</b> |
| Substituição do fusível da unidade de controlo           |           |
| Inspeções de segurança                                   |           |
| <b>AVARIAS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</b>                  | <b>12</b> |
| <b>ACESSÓRIOS E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO</b>                | <b>13</b> |
| Eliminación                                              |           |
| <b>DADOS TÉCNICOS</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>TERMOS DE GARANTIA</b>                                | <b>14</b> |
| Vigilância pós-comercialização                           |           |
| Centros de serviço                                       |           |
| <b>ANEXO</b>                                             | <b>15</b> |

## UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

### INDICAÇÕES MÉDICAS

O Dispenser DP 30 LipoPlus é uma bomba de infiltração, que é utilizada em combinação com um pedal e um conjunto de tubos esterilizados de uso único (dispositivos médicos independentes) para infiltrar a solução tumescente (solução Klein) na camada subcutânea de gordura. O Dispenser DP 30 LipoPlus é utilizado na seguinte indicação médica:

// Liposucção

### CONTRAINDICAÇÕES

As contraindicações gerais dizem respeito ao estado de saúde do paciente, tais como doenças cardiopulmonares graves, inflamação local, septicemia e distúrbios de coagulação.

As contraindicações específicas incluem:

**Feridas infetadas** A lipoaspiração só pode ser realizada após tratamento da infeção e do tecido necrosado.

**Por princípio, mau estado geral de saúde do paciente.**

**Lipoaspiração logo após uma dieta rigorosa do paciente.**

**Obesidade mórbida (obesidade)** Aspiração de grandes volumes aumenta o risco de morte devido a extravasão.

**Infusão intravascular de fluidos.**

**Infiltração de volume excessivo de solução tumescente (litros mutilados).**

**Tratamento de uma área de superfície excessiva.**

### EFEITOS SECUNDÁRIOS

Os efeitos secundários da infiltração de solução tumescente para lipoaspiração são geralmente infrequentes e menores.

A literatura clínica relata os seguintes efeitos secundários:

- ↪ Inflamação (local/sistémica)
- ↪ Sangramento
- ↪ Haematomas
- ↪ Oedema
- ↪ Gordura/embolismo pulmonar

### UTILIZADORES PRETENDIDOS

O dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas por utilizadores profissionais e formados, em contextos profissionais (por exemplo, hospital, clínica). O dispositivo não deve ser utilizado por pacientes ou por utilizadores não formados.

### PÚBLICO ALVO

Adultos (> 18 anos de idade). Ver contra-indicações para limitar os factores de saúde.

### CONDIÇÕES AMBIENTAIS

|                     | TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO | OPERAÇÃO        |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| Humidade relativa   | max. 90%                   | max. 80%        |
| Temperatura         | 0 °C – 60 °C               | 10 °C – 30 °C   |
| Pressão atmosférica | 700 – 1'060 hPa            | 800 – 1'060 hPa |

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Cada utilização do Dispensador DP 30 LipoPlus diferente do [UTILIZAÇÃO PRETENDIDA >4] causa riscos para os pacientes e pessoal treinado. Se forem realizados exames físicos e terapias sem a utilização dos dispositivos, então os dispositivos devem ser removidos do local de tratamento. Evitar qualquer ligação ou proximidade estreita com outros dispositivos.

### ALTERAÇÃO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA



Não são permitidas modificações/manipulações no Dispenser DP 30 LipoPlus e seus acessórios. O não cumprimento destas instruções pode ter consequências imprevisíveis para o utilizador, para o doente ou para terceiros. Para complicações consequentes, resultantes de modificações/manipulações ilícitas, o fabricante não assume qualquer responsabilidade e a garantia é nula.

A NOUVAG recomenda a utilização da solução de anestesia tumescente Klein. A utilização de outras soluções é da responsabilidade do cirurgião. Ao infiltrar-se na solução de anestesia tumescente, não exceder 0,05% de concentração anestésica.

### REQUISITOS ESSENCIAIS



Não utilizar a unidade se a embalagem de expedição tiver buracos/talhas nas superfícies planas e/ou se a embalagem protectora de poliestireno estiver danificada.

O Dispenser DP 30 LipoPlus apenas pode ser operado por profissionais qualificados e com formação específica.

A utilização de produtos de terceiros é da exclusiva responsabilidade do operador. O correto funcionamento e a segurança dos doentes não são garantidos com a utilização de acessórios de outros fabricantes.

As reparações só podem ser efectuadas por técnicos autorizados do serviço NOUVAG!

Em caso de utilização indevida, reparação ou não cumprimento das presentes instruções, o fabricante fica exonerado de qualquer obrigação decorrente da garantia.

Antes da utilização do dispositivo, antes da montagem e antes da sua entrada em funcionamento, o utilizador deverá verificar sempre se o equipamento e os acessórios se encontram em boas condições de funcionamento, limpos, estéreis e operacionais.

Confirme que as definições de voltagem de funcionamento correspondem à voltagem da rede no local.

O Dispenser DP 30 LipoPlus só pode ser operado sob vigilância constante de pessoal médico. Não possui alarmes que indiquem avarias. Por conseguinte, é indispensável que se efetue o controlo permanente do débito.

### DURANTE A UTILIZAÇÃO



O dispositivo não é fornecido estéril. Tenha em atenção as instruções de limpeza descritas no [LIMPEZA E DESINFECÇÃO >10].

Não utilize o dispositivo na proximidade de substâncias inflamáveis!

Não é permitido utilizar o Dispenser DP 30 LipoPlus de forma diferente das indicações descritas no [INDICAÇÕES MÉDICAS >4]). A responsabilidade será inteiramente assumida pelo utilizador ou operador.

---

## INCLUÍDO NA ENTREGA

| REF   | DESCRIÇÃO                                            | QUANTIDADE |
|-------|------------------------------------------------------|------------|
| 4181  | Unidade de controlo Dispenser DP 30 LipoPlus         | 1          |
| 6022  | Conjunto de tubos descartáveis, esterilizados, 4 m   | 1          |
| 1770  | Suporte para o frasco do fluido de irrigação         | 1          |
| 31628 | Instruções de utilização do Dispenser DP 30 LipoPlus | 1          |

### OPCIONAL: CONJUNTO NO. 4161 – CONSTITUÍDO POR DISPENSER DP 30 LIPOPLUS COM PEDAL ON/OFF


| REF     | DESCRIÇÃO    | QUANTIDADE |
|---------|--------------|------------|
| 1527nou | Pedal ON/OFF | 1          |

### OPCIONAL: CONJUNTO NO. 4163 – CONSTITUÍDO POR DISPENSER DP 30 LIPOPLUS COM PEDAL VARIO


| REF     | DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE |
|---------|-------------|------------|
| 1511nou | Pedal VARIO | 1          |

## VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO

### VISTA FRONTAL

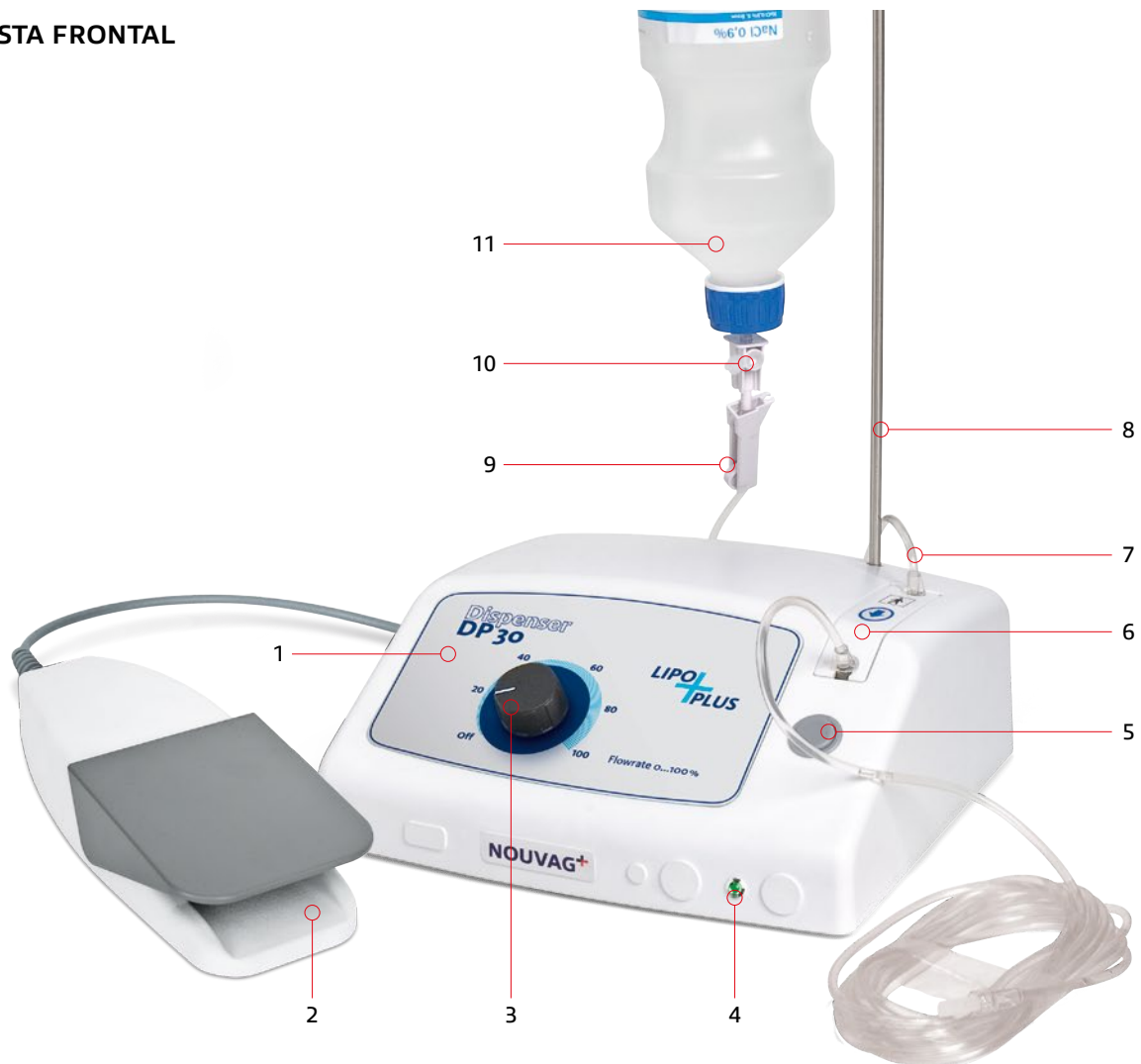

### VISTA POSTERIOR

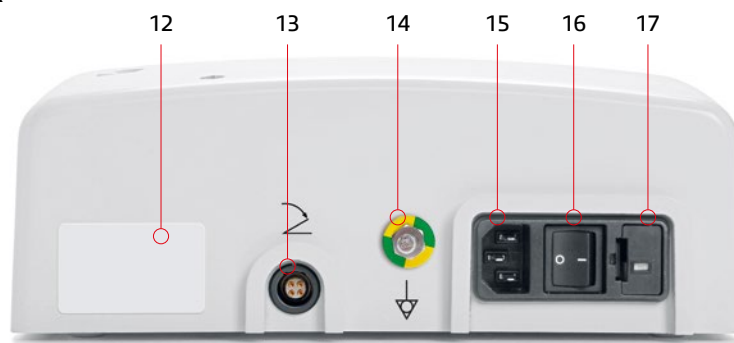

1 Painel de controlo com escala de deslocamento da bomba 2 Pedal 3 Botão de controlo para definir o volume de deslocamento 4 Luz indicadora de Ligado/Desligado (ON/OFF) 5 Tecla de abertura do suporte para o tubo 6 Bomba peristáltica 7 Tubo 8 Suporte para frasco do fluido de irrigação 9 Pinça corta fluxo 10 Válvula de ventilação 11 Líquido de irrigação 12 Placa com designação do tipo, número de referência, número de série, informação sobre a fonte de alimentação e os fusíveis 13 Ficha para o pedal 14 Compensação de potencial 15 Ligação à rede 16 Interruptor principal 17 Módulo com fusíveis de dispositivo e ajuste de tensão do país

## MANUTENÇÃO

### INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS

- O Dispenser DP 30 LipoPlus e todos os acessórios e instrumentos necessários devem ser colocados numa superfície plana nivelada e antiderrapante.
- Não permita que a capacidade de funcionamento do dispositivo e acessórios seja comprometida por fatores limitativos.
- A vista do painel de controlo deve ser sempre garantida.
- Devem ser tomadas todas as medidas para impedir a queda de algum objeto sobre o pedal.
- A ficha da parte posterior do dispositivo deve estar sempre acessível.

### CONEXÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Para prevenir o risco de choque elétrico, o dispositivo só deve ser ligado a uma rede de alimentação com condutor de proteção terra (PE).

Se a tensão indicada não corresponder à tensão da rede local, o suporte cinzento do fusível deve ser ajustado para a tensão correta:



- 1 Desligar o aparelho.
- 2 Desligue o cabo de alimentação.
- 3 Use uma chave de fenda para remover a tampa.
- 4 Retire o suporte do fusível.
- 5 Retire o suporte cinzento do fusível e volte a inserir com a definição da tensão pretendida indicada na janela.
- 6 Faça deslizar o suporte cinzento do fusível de volta para a sua posição e feche.
- 7 Verifique a tensão da rede indicada na ranhura do fusível.
- 8 Volte a ligar o cabo de alimentação ao dispositivo.

### LIGAÇÃO DE EQUALIZAÇÃO POTENCIAL DE ACORDO COM DIN 42801

Na parte de trás do dispositivo está instalada uma ficha de equalização potencial, de acordo com a norma DIN 42801. A equalização potencial adicional tem a tarefa de equalizar potenciais entre diferentes partes de materiais condutores que podem ser tocados ao mesmo tempo, ou reduzir diferenças potenciais. Esta ligação deve ser utilizada, para proteger o paciente, o utilizador e terceiros contra tensões de contacto.

A ficha equipotencial é marcada com o seguinte símbolo:



## MANUTENÇÃO

### PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO

- 1 Insira o suporte para o fluido de irrigação na sua base.
- 2 Ligue a ficha do pedal à tomada do pedal na parte posterior da unidade de controlo. 
- 3 Prepare a tubagem (ver imagens).



Confirme a data de validade do tubo e verifique se a embalagem não está danificada. Usar tubos não estéreis pode provocar infeções graves que, em casos extremos, podem ser fatais.



Ao inserir o tubo, certifique-se de que a extremidade do tubo com o espigão sai da bomba para a parte posterior da unidade de controlo, de modo a que possa ser ligada ao frasco de irrigação. Desta forma, o fluido flui na direção do doente.

Apenas o tubo NOUVAG pode ser utilizado, caso contrário a função não pode ser garantida.

A quantidade de líquido não deve ser regulada pela pinça corta fluxo no tubo flexível, mas sim pelo interruptor rotativo e pelo pedal. Portanto, abra a pinça corta fluxo até ao máximo.

O saco do fluido de infiltração deve pesar no máximo 2kg. Sacos mais pesados podem fazer tombar o dispositivo.



- A Pressione o botão (no topo da unidade de controlo) para abrir a bomba.
- B O compartimento com o suporte para o tubo abre-se.
- C Coloque o tubo no suporte para o efeito de tal forma que a extremidade do tubo com o espigão saia da bomba para a parte posterior da unidade de controlo. Confirme que o tubo fica seguro.
- D Com o tubo instalado, pressione o compartimento para baixo até encaixar na posição fazendo um “clique”.



- 4 Introduza o espigão na ponta do tubo no frasco do fluido de irrigação e pendure o frasco no suporte.
- 5 Abra a pinça corta fluxo o mais possível.
- 6 Abra o filtro de ar do espigão.
- 7 Ligue a unidade de controlo à tomada usando a ficha de alimentação.

## FUNCIONAMENTO

### LIGAR E DESLIGAR O DISPOSITIVO

O interruptor de ligar/desligar «I/O» na parte posterior da unidade de controlo serve para ligar e desligar a unidade de controlo. O dispositivo pode ser desligado a qualquer momento independentemente de qualquer procedimento para o desligar. A luz indicadora verde do painel de controlo (em cima à esquerda) está acesa quando o interruptor principal está ligado e o dispositivo está pronto para funcionar.

### REGULAÇÃO DO PROCESSO DE INFILTRAÇÃO

**Botão de controlo com o pedal ON/OFF** Volume do fluxo desejado é regulado com o botão de controlo. O processo de bombagem é iniciado ativando o pedal ON/OFF. O volume do fluxo pode ser ajustado a qualquer momento através do botão de controlo.

**Botão de controlo com o pedal VARIO** Volume do fluxo máximo pode ser ajustado a qualquer momento através do botão de controlo, mesmo que o pedal esteja a ser pressionado. O controlo com o pedal Vario regula o volume do fluxo da bomba dentro do limite máximo definido.

### BOMBA DE TUBO FLEXÍVEL

Rode o botão de controlo no sentido dos ponteiros do relógio a partir da posição OFF. A bomba arranca, o líquido aparece na extremidade aberta do tubo. Rodar o botão até ao valor máximo para controlar o aumento do volume do fluxo. A bomba pára imediatamente se a tecla de abertura do suporte da bomba for pressionada quando a bomba estiver a funcionar.

### VERIFICAÇÃO FUNCIONAL

Antes de ligar o Dispenser DP 30 LipoPlus ou de usar qualquer acessório, o utilizador deve assegurar-se sempre de que cada componente não apresenta defeitos, se encontra em boas condições de limpeza e esterilidade e está operacional. O tubo tem de estar introduzido de acordo com a direção correta do fluxo. Depois do dispositivo ser ligado, a luz indicadora verde acende.

## LIMPEZA E DESINFEÇÃO



Limpe e desinfete o dispositivo após cada tratamento!

### UNIDADE DE CONTROLO E PEDAL

Limpe o exterior com um detergente de superfícies testado ou com solução de álcool etílico a 70 %. O painel frontal da unidade de controlo é fechado hermeticamente para poder ser limpo.

### CONJUNTO DE TUBOS REF 6022



Tubos de uso único não reutilizar.

Os tubos devem ser eliminados de forma adequada depois do uso.

Não use o tubo se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Não use o tubo depois da data de validade.

Apenas o conjunto de mangueiras REF 6022 pode ser usado.


A reutilização ou reesterilização do tubo de montagem não é uma garantia de esterilidade. As características materiais mudam de tal forma que podem levar à falha do sistema. Em consequência disso podem ocorrer infeções graves e, no pior dos casos, a morte do paciente.

## MANUTENÇÃO

### SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL DA UNIDADE DE CONTROLO

O próprio utilizador pode substituir os fusíveis da unidade de controlo. Estes encontram-se na parte posterior do dispositivo, na ranhura ao lado do interruptor principal:

- 1 Desligar o aparelho.
- 2 Desligar a ficha de alimentação.
- 3 Abra a ranhura com a ajuda de uma chave de fendas.
- 4 Substitua o fusível queimado T 3,15 A, 250 V AC.
- 5 Faça deslizar o suporte do fusível de volta para a sua posição e feche a abertura.
- 6 Verifique a tensão da rede indicada na ranhura do fusível.
- 7 Volte a ligar a ficha à tomada.

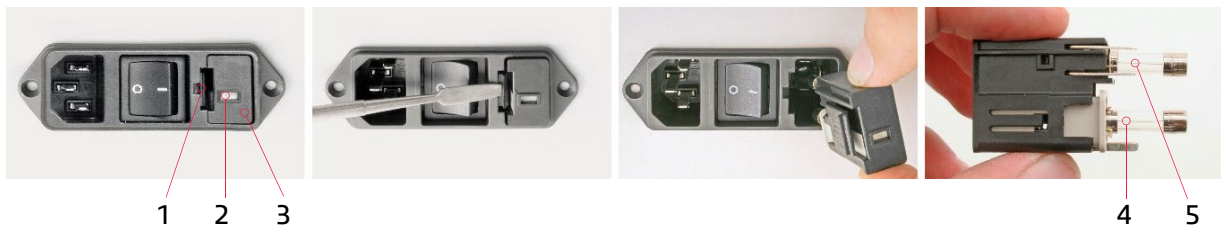

1 Mecanismo de bloqueio 2 Janela que indica a definição da tensão 3 Compartimento de fusíveis 4 Fusível 1 5 Fusível 2

### INSPEÇÕES DE SEGURANÇA

As principais características do desempenho foram definidas e avaliadas através de uma análise de risco do dispositivo. A análise é arquivada no dossier de gestão de riscos do fabricante.

Os regulamentos de vários países exigem controlos técnicos de segurança dos dispositivos médicos. O controlo técnico de segurança é uma verificação periódica de segurança prescrita às entidades exploradoras de dispositivos médicos. O objetivo desta medida é detetar atempadamente falhas nos aparelhos e riscos para pacientes, utilizadores e terceiros. O controlo técnico de segurança do Dispenser DP 30 LipoPlus deve ser executado e documentado a cada 2 anos e apenas por organismos autorizados. Instruções de serviço, diagramas e descrições estão disponíveis por pedido ao representante comercial.

A NOUVAG presta o serviço de inspeção de segurança aos seus clientes. Os endereços podem ser encontrados no apêndice das instruções de operação em [\[CENTROS DE SERVÍCIO > 14\]](#). Contacte o nosso departamento de assistência técnica para mais informações.

## AVARIAS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| AVARIA                                                     | CAUSA                                                                      | SOLUÇÃO                                                        | NOTA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| O dispositivo não funciona (a luz indicadora está apagada) | A unidade de controlo não está ligada                                      | Mude o interruptor da posição «I/O» para «I»                   | [ LIGAR E DESLIGAR O DISPOSITIVO >10]                                          |
|                                                            | Ligação de corrente não estabelecida                                       | Ligue a unidade de controlo à corrente elétrica                | [ CONEXÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO >8]                                           |
|                                                            | Tensão de funcionamento incorreta                                          | Verifique a tensão da rede                                     | [ CONEXÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO >8]                                           |
|                                                            | Fusível queimado                                                           | Substitua o fusível                                            | [ SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL DA UNIDADE DE CONTROLO >11]                          |
| A bomba não funciona (a luz indicadora está acesa)         | O interruptor de controlo está numa posição muito baixa ou desligado «OFF» | Aumente o desempenho da bomba, rodando o interruptor para cima | [ REGULAÇÃO DO PROCESSO DE INFILTRAÇÃO >10]                                    |
|                                                            | O tubo não está inserido corretamente                                      | Insira o tubo corretamente                                     | [ PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO >9]                                                |
|                                                            | Funcionamento incorreto                                                    | Consulte as instruções de utilização                           | [ PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO >9]                                                |
|                                                            | O pedal não foi pressionado                                                | Pressione o pedal                                              | [ REGULAÇÃO DO PROCESSO DE INFILTRAÇÃO >10]                                    |
|                                                            | A pinça corta fluxo está fechada                                           | Abra a pinça corta fluxo até ao máximo                         | [ PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO >9]                                                |
| O pedal não funciona (a luz indicadora está acesa)         | O pedal não está ligado                                                    | Ligue o pedal à ficha na parte posterior do dispositivo        | [ VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO >7]<br>[ PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO >9]            |
|                                                            | Funcionamento incorreto                                                    | Consulte as instruções de utilização                           | [ PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO >9]<br>[ REGULAÇÃO DO PROCESSO DE INFILTRAÇÃO >10] |

Se não conseguir resolver um problema, contacte o seu fornecedor ou um serviço de assistência técnica autorizado. Os endereços podem ser encontrados no apêndice das instruções de operação em [CENTROS DE SERVIÇO >14].

## ACESSÓRIOS E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

### ACESSÓRIOS

| DESCRIÇÃO                                          | REF     |
|----------------------------------------------------|---------|
| Pedal ON/OFF                                       | 1527nou |
| Pedal VARIO                                        | 1511nou |
| Suporte para o frasco do fluido de irrigação       | 1770    |
| Conjunto de tubos descartáveis, esterilizados, 4 m | 6022    |

Para encomendar peças adicionais, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

### ELIMINACIÓN



Os dispositivos eléctricos e electrónicos que atingiram o fim da sua vida útil compreendem resíduos perigosos e não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Aplicam-se os regulamentos de eliminação nacionais e locais em vigor.



Ao eliminar o dispositivo, componentes e acessórios do dispositivo, devem ser seguidos os requisitos especificados na legislação. Para assegurar a protecção ambiental, os dispositivos antigos podem ser devolvidos ao revendedor ou fabricante.

## DADOS TÉCNICOS

|                                                                                    |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Voltagem, variável                                                                 | 100V~ / 115V~ / 230V~, 50/60 Hz |
| Fusível, fonte alimentação                                                         | 2 fusíveis, T 3,15 A, 250 VAC   |
| Consumo eléctrico                                                                  | 120 VA                          |
| Deslocamento volumétrico                                                           | 0–480 ml/min.                   |
| Pressão máx. ao fechar o sistema de mangueiras                                     | 2,0 bar                         |
| Parte de aplicação                                                                 | Tipo BF*                        |
| Classe de proteção                                                                 | Classe I                        |
| Dimensões (L x P x A)                                                              | 260 x 250 x 110 mm              |
| Peso líquido da Unidade de Controlo                                                | 3,4 kg                          |
| Peso máximo no dispositivo de suspensão do reservatório de fluido para tumescência | 2,0 kg                          |

Os valores indicados são válidos apenas para soluções aquosas e sem instrumento acoplado.

\* A parte de aplicação é o conjunto de mangueiras com instrumento ligado.

## TERMOS DE GARANTIA

A NOUVAG garante que este produto está livre de defeitos de fabrico e materiais durante um período de doze (12) meses a partir da data original de compra. Se o cartão de garantia for devolvido para registo ou a extensão da garantia for solicitada no nosso website no prazo de 4 semanas a partir da data de compra, a cobertura da garantia é prolongada por um período de 6 meses, as peças de desgaste são excluídas da garantia. Durante este período de garantia, a NOUVAG concorda em reparar ou substituir o produto à sua escolha, se o produto não funcionar correctamente em condições normais de utilização e serviço e se tal falha se dever exclusivamente a um defeito de fabrico ou de materiais.

Esta garantia é anulada se a reparação ou serviço do produto for efectuado ou tentado por alguém não autorizado pela NOUVAG, ou se uma peça de substituição não autorizada pela NOUVAG for utilizada em qualquer reparação ou serviço.

## VIGILÂNCIA PÓS-COMERCIALIZAÇÃO



Se tiver alguma queixa relacionada com a utilização do dispositivo médico, contacte imediatamente o fabricante por correio eletrónico [complaint@nouvag.com](mailto:complaint@nouvag.com) ou por telefone.

Para fornecer informações adequadas, é favor preencher o formulário de reclamação:

[Nouvag.com > Contact > Complaint Form](https://www.nouvag.com/Contact/Complaint-Form).

## CENTROS DE SERVICIO



Suíça  
NOUVAG AG  
St. Gallerstrasse 25  
9403 Goldach

Telefone +41 71 846 66 00  
[info@nouvag.com](mailto:info@nouvag.com)  
[www.nouvag.com](http://www.nouvag.com)



Alemanha  
NOUVAG GmbH  
Schulthaissstrasse 15  
78462 Konstanz

Telefone +49 7531 1290-0  
[info-de@nouvag.com](mailto:info-de@nouvag.com)  
[www.nouvag.com](http://www.nouvag.com)



Uma lista completa de todos os pontos de serviço autorizados NOUVAG em todo o mundo pode ser consultada em [Nouvag.com > Service > Global Service Centres](https://www.nouvag.com/Service/Global-Service-Centres)

## ANEXO

### Electromagnetic compatibility (EMC)

Remark:

The **Product** subsequently referred to herein always denotes the Dispenser DP 30 LipoPlus.

Changes or modifications to this product not expressly approved by the manufacturer may result in increased emissions or decreased immunity performance of the product and could cause EMC issues with this or other equipment. This product is designed and tested to comply with applicable regulations regarding EMC and shall be installed and put into service according to the EMC information stated as follows.

#### WARNING

Use of portable phones or other radio frequency (RF) emitting equipment, including accessories (antennas e.g.) in distances below 30 cm (12 inches) to the product, may cause unexpected or adverse operation.

#### WARNING

The product is suitable for use in hospitals other than in the vicinity of active devices of the HF surgical devices or except in HF screening rooms used for magnetic resonance imaging.

#### WARNING

The product shall not be used adjacent to, or stacked with, other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, the product shall be tested to verify normal operation in the configuration in which it is being used.

#### Essential Performance

The essential performance is that the infiltration of tumescent solution in the fat tissue taking into account the infiltration flow rate and pressure is maintained. The maximum infiltration flow rate deviation is  $\pm 25\%$ , the infiltration flowrate is between 60 and 480ml/min and the maximum pressure is 2.5bar.

#### Compliant Cables and Accessories

#### WARNING

The use of accessories, transducers and cables other than those specified may result in increased emissions or decreased immunity performance of the product.

The table below lists cables, transducers, and other applicable accessories for which the manufacturer claims EMC compliance.

**NOTE:** Any supplied accessories that do not affect EMC compliance are not listed.

| Description                                         | Length max. |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Power supply cord REF 22261 / 22262 / 22264 / 22266 | 3.0m        |
| Foot pedal IPX8 REF 1511nou / 1527nou               | 2.9m        |

#### Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions

The Product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Product should assure that it is used in such an environment.

| Emissions test                                          | Compliance | Electromagnetic environment - guidance                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF emissions<br>CISPR 11                                | Group 1    | The Product uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.                                         |
| RF emissions<br>CISPR 11                                | Class B    | The Product is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. |
| Harmonic emissions<br>IEC 61000-3-2                     | Class A    |                                                                                                                                                                                                                          |
| Voltage fluctuations/flicker emissions<br>IEC 61000-3-3 | complies   |                                                                                                                                                                                                                          |

#### Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The Product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Product should assure that it is used in such an environment.

| Immunity tests                                      | IEC 60601<br>Test level                                                                          | Compliance level                                                                                 | Electromagnetic environment - guidance                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrostatic discharge<br>(ESD)<br>IEC 61000-4-2   | +/- 8 kV contact<br>+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV,<br>+/- 15 kV air                               | +/- 8 kV contact<br>+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV,<br>+/- 15 kV air                               | Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %. |
| Electrical fast<br>transient/burst<br>IEC 61000-4-4 | +/- 2 kV with 100kHz<br>for power supply lines<br>+/- 1 kV with 100kHz<br>for input/output lines | +/- 2 kV with 100kHz<br>for power supply lines<br>+/- 1 kV with 100kHz<br>for input/output lines | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.                                                            |
| Surge<br>IEC 61000-4-5                              | +/- 0.5 kV, +/- 1 kV<br>differential mode<br>+/- 0.5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV<br>common mode       | +/- 0.5 kV, +/- 1 kV<br>differential mode<br>+/- 0.5 kV, +/- 1 kV, +/- 2 kV<br>common mode       | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.                                                            |

## ANEXO

|                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines<br>IEC 61000-4-11 | 0 % $U_T$ ; for 0,5 cycle with 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 degree<br>0 % $U_T$ ; for 1 cycle | 0 % $U_T$ ; for 0,5 cycle with 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 degree<br>0 % $U_T$ ; for 1 cycle | Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.<br><br>If the user of the Product requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Product be powered from an uninterruptible power supply or a battery. |
|                                                                                                        | 70 % $U_T$ ; for 25/30 cycles<br>0 % $U_T$ ; for 5 sec                                              | 70 % $U_T$ ; for 25/30 cycles<br>0 % $U_T$ ; for 5 sec                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Power frequency (50/60Hz) magnetic field<br>IEC 61000-4-8                                              | 30 A/m                                                                                              | 30 A/m                                                                                              | Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.                                                                                                                                             |

Note:  $U_T$  is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

### Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity for not life support equipment

The Product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Product should assure that it is used in such an environment.

| Immunity tests                | IEC 60601 Test level                                                                                               | Compliance level                                                                                                   | Electromagnetic environment - guidance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Product, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.<br><br><b>Recommended separation distance:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conducted RF<br>IEC 61000-4-6 | 3 V rms<br>0.15 MHz to 80 MHz<br><br>6 V rms<br>inside ISM bands between 150 kHz to 80 MHz<br><br>80% AM bei 1 kHz | 3 V rms<br>0.15 MHz to 80 MHz<br><br>6 V rms<br>inside ISM bands between 150 kHz to 80 MHz<br><br>80% AM bei 1 kHz | $d = 0,35 \sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Radiated RF<br>IEC 61000-4-3  | 3 V/m<br>80 MHz to 2.7 GHz<br><br>80% AM bei 1 kHz                                                                 | 3 V/m<br>80 MHz to 2.7 GHz<br><br>80% AM bei 1 kHz                                                                 | $d = 0,35 \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz<br><br>$d = 0,7 \sqrt{P}$ 800 MHz to 2,7 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Where $P$ is the maximum output power rating in the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and $d$ is the recommended separation distance in metres (m).<br><br>Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey <sup>a</sup> , should be less than the compliance level in each frequency range <sup>b</sup> .<br><br>Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:<br> |

Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a Fixed strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To access the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, and electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Product is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the Product.

b over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.



## ANEXO

| Electromagnetic immunity against high-frequency wireless communication devices |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| Test frequency<br>MHz                                                          | Frequency band<br>MHz | Communication service                                                          | Modulation                       | Maximum Performance<br>W | distance<br>m | Test level<br>V/m |
| 385                                                                            | 380 to 390            | TETRA 400                                                                      | Pulse modulation<br>18 Hz        | 1.8                      | 0.3           | 27                |
| 450                                                                            | 430 to 470            | GMRS 460,<br>FRS 460                                                           | FM<br>± 5 kHz Hub<br>1 kHz Sinus | 2                        | 0.3           | 28                |
| 710                                                                            | 704 to 787            | LTE Band 13, 17                                                                | Pulse modulation<br>217 Hz       | 0.2                      | 0.3           | 9                 |
| 745                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 780                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 810                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 870                                                                            | 800 to 960            | GSM 800/900,<br>TETRA 800,<br>iDEN 820,<br>CDMA 850,<br>LTE Band 5             | Pulse modulation<br>18 Hz        | 2                        | 0.3           | 28                |
| 930                                                                            |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 1720                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 1845                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 1970                                                                           | 1700 to 1990          | GSM 1800,<br>CDMA 1900,<br>GSM 1900,<br>DECT,<br>LTE Band 1, 3,<br>4, 25; UMTS | Pulse modulation<br>217 Hz       | 2                        | 0.3           | 28                |
| 2450                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 5240                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 5500                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 8785                                                                           | 5100 to 5800          | Bluetooth,<br>WLAN 802.11<br>b/g/n,<br>RFID 2450,<br>LTE Band 7                | Pulse modulation<br>217 Hz       | 2                        | 0.3           | 28                |
| 5240                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 5500                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 8785                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 5240                                                                           | 5100 to 5800          | WLAN 802.11 a/n                                                                | Pulse modulation<br>217 Hz       | 0.2                      | 0.3           | 9                 |
| 5500                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 8785                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |
| 8785                                                                           |                       |                                                                                |                                  |                          |               |                   |

| Recommended separation distances between<br>portable and mobile RF communications equipment and the not life support equipment                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| The Product is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Product can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Product as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment. |                                                                |                                          |                                          |
| Rated maximum output power<br>of transmitter<br>W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Separation distance according to frequency of transmitter<br>m |                                          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 kHz to 80 MHz<br>$d = 0,35 \sqrt{P}$                       | 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 0,35 \sqrt{P}$ | 800 MHz to 2.5 GHz<br>$d = 0,7 \sqrt{P}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                          |                                          |
| 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,04                                                           | 0,04                                     | 0,07                                     |
| 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,11                                                           | 0,11                                     | 0,22                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,35                                                           | 0,35                                     | 0,7                                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,1                                                            | 1,1                                      | 2,2                                      |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,5                                                            | 3,5                                      | 7                                        |
| For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance $d$ in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where $P$ is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the higher frequency range applies.                                                                                      |                                                                |                                          |                                          |
| Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                          |                                          |
| Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                          |                                          |



**NOUVAG AG**  
St. Gallerstrasse 25  
9403 Goldach  
Switzerland

Phone +41 71 846 66 00  
[info@nouvag.com](mailto:info@nouvag.com)  
[www.nouvag.com](http://www.nouvag.com)



**NOUVAG GmbH**  
Schulthaisstrasse 15  
78462 Konstanz  
Germany

Phone +49 7531 1290-0  
[info-de@nouvag.com](mailto:info-de@nouvag.com)  
[www.nouvag.com](http://www.nouvag.com)

**CE** 0197