



# Deka

Le lit mécanique

# Deka

## Le lit mécanique

Le Deka est le modèle de lit de base de Stiegmeyer. Le nom Deka caractérise trois variantes d'équipement différentes :

- avec réglage de la hauteur
- sans réglage de la hauteur
- variante pour la psychiatrie

Il est possible de concevoir un lit hospitalier adapté aux besoins spécifiques des patients. Les différentes variantes se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix. Elles offrent un design cohérent et flexible, permettant de répondre aux exigences et aux situations individuelles – par exemple, grâce à des panneaux et décors personnalisables. Le modèle Deka s'intègre ainsi parfaitement à chaque environnement, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique. Son châssis compact permet une grande maniabilité, même dans des espaces confinés.

Au-delà des options d'équipement, chaque lit Deka peut être transformé pour répondre à des besoins spécifiques grâce aux accessoires sur-mesure de Stiegmeyer. Son design épuré facilite une préparation hygiénique, tandis que la version lavable en machine aide les établissements hospitaliers à lutter contre les infections. Le modèle mécanique, sans alimentation électrique, est particulièrement adapté aux établissements psychiatriques et à d'autres environnements cliniques ayant des besoins particuliers.

Cela permet une grande flexibilité tout en assurant un confort optimal pour les patients et un usage pratique pour le personnel médical.

### Avantages pour tous les utilisateurs

#### Personnel soignant

- toujours prêt à l'emploi, quel que soit le lieu
- utilisation rapide et intuitive
- utilisation simple du système de protection ¾
- bonne mobilité

#### Technicien

- design robuste et durable
- suppression des contrôles électriques
- réduction de la maintenance et des réparations dues à l'absence de composants électriques et de câbles

#### Gestion

- disponibilité flexible, même sur des sites sans raccordement électrique ou dans des domaines spécifiques
- grande rentabilité sur toute la durée d'utilisation

## Sommaire

<b>Le lit avec réglage de la hauteur</b>	4
<b>Le lit sans réglage de la hauteur</b>	5
<b>Lits spéciaux pour la psychiatrie</b>	6
<b>Systèmes de protection</b>	7
<b>Équipements et options</b>	8
<b>Caractéristiques techniques</b>	11
<b>Decors</b>	11



**Deka**  
avec réglage de la hauteur  
La variante mécanique

- **Réglage de la hauteur :**  
43 à 83 cm
- **Le lit pratique :**
  - Sommier 90 x 200 cm
  - Dimensions extérieures sans système de protection 95 x 213 cm
  - Sommier en 4 parties

Page 4 – 7



**Deka**  
sans réglage de la hauteur  
La variante sans réglage de la hauteur

- **Hauteur de sommier :**  
env. 50 ou 55 cm
- **Le lit robuste :**
  - Sommier 90 x 200 cm
  - Dimensions extérieures avec système de protection 102,5 x 213 cm
  - Très facile à entretenir


Page 8



**Deka**  
Lits spéciaux pour la psychiatrie  
La variante pour la psychiatrie

- **Réglage de la hauteur :**  
43 à 83 cm
- **Le lit pour des exigences particulières :**
  - Sommier 90 x 200 cm
  - Éléments spécialement sécurisés
  - Variante sans réglage de la hauteur au choix

Page 9

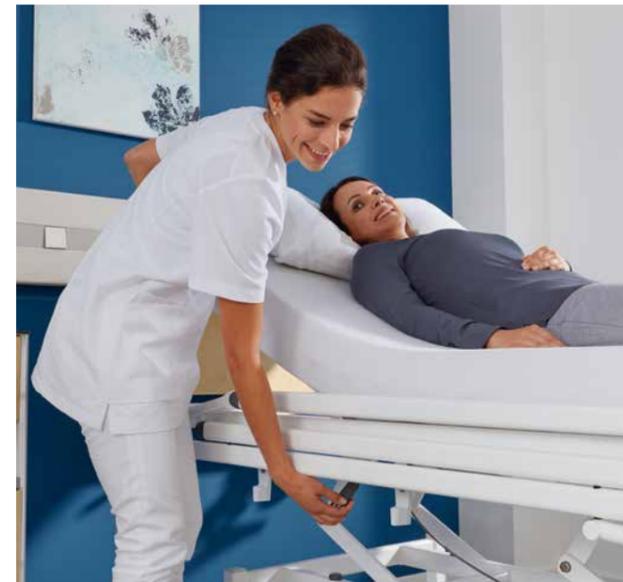

▲ Réglage simple du dossier.



▲ Dossier rétractable de série pour plus de confort et pour éviter les forces de cisaillement.

## Deka sans réglage de la hauteur

Dans certains domaines cliniques, un lit hospitalier ne doit remplir que des fonctions de base. Pour un tel équipement, le Deka mécanique sans réglage de la hauteur est idéal. Ce modèle est livré avec une hauteur de 50 ou 55 cm - un bon compromis entre une hauteur adaptée au patient pour se lever et un travail ergonomique des soignants.

Le Deka sans réglage de la hauteur se distingue par un bon rapport qualité-prix :


- Très facile à entretenir
- En option, système de protection  $\frac{3}{4}$  pivotant sans effort avec une hauteur de 41 cm
- Sommier en deux parties, en option également en quatre parties

## Deka avec réglage de la hauteur

La conception mécanique du Deka rend l'opérateur indépendant du réseau électrique. En même temps, le lit peut être réglé de manière suffisamment large et avec un minimum d'effort pour permettre au patient de s'allonger confortablement et au personnel soignant de travailler de manière ergonomique.

### Des avantages forts :

- Réglage de la hauteur ménageant le dos par l'actionnement de la pédale de pompage hydraulique
- En option, système de protection  $\frac{3}{4}$  pivotant sans effort avec une hauteur de 41 cm
- Lavable en machine en option

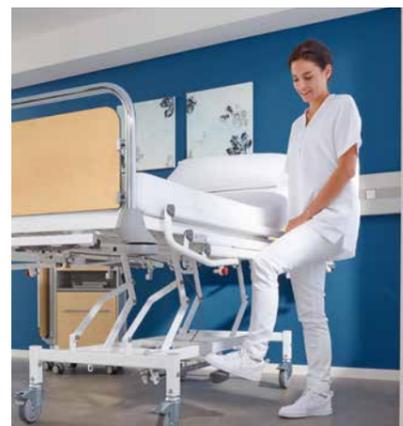

◀ Plage de réglage de la hauteur de 43 à 83 cm.





D'autres informations sont disponibles dans notre brochure séparée sur les lits psychiatriques.



# Deka

## Lits spéciaux pour la psychiatrie

Dans les établissements psychiatriques, les patients ont souvent besoin d'une protection particulière. La mise en danger d'autrui et de soi-même doit être exclue dans les situations de crise. Spécialement conçu pour cet environnement clinique, Deka mise sur un niveau de sécurité élevé. Une fixation renforcée de la pédale de

reglage de la hauteur, des pédales de frein solidement vissées et le sommier à grille métallique soudé illustrent la robustesse de la construction. Le lit offre différentes options en termes de confort d'utilisation, de possibilités de fixation et de protection contre les abus.



▲ En option, panneau Classic rabattable côté pied pour un meilleur accès au patient.



▲ Sécurisation de la pédale de réglage de la hauteur avec une goupille.

# Système de protection

## Protection individuelle

La protection du patient contre les chutes est une priorité. Parallèlement, il est important d'encourager sa mobilité et de réduire les mesures restreignant sa liberté. Les systèmes de protection latérale de Deka offrent un choix adapté à ces exigences :

- Système de protection ¾ – protection et orientation avec une hauteur de protection de 41 cm ainsi qu'une vue dégagée grâce au design des barres transversales
- Système de protection continue – protection maximale

Le modèle sans système de protection peut être transformé sans outils en un lit avec système de protection à barreaux continus pour s'adapter aux changements de situation.



▲ Déverrouillage sans effort du système de protection ¾.



▲ Pas d'espace supplémentaire requis grâce aux barres et une assise confortable sur le bord du lit.



▲ Transformation ultérieure possible avec un système de protection à barreaux continus en option.

# Équipements et options

## Panneaux de tête et de pied



### Design Valero

- Design moderne
- avec profilés robustes (entièrement peints ou acier inoxydable sur les côtés, acier sur le dessus)
- Panneaux de tête et de pied entièrement amovibles ou fixes
- Décors selon la collection Resopal de Stiegmeyer



### Design Classic

- Design classique
- avec des profilés en acier robustes
- Panneaux de tête et de pied entièrement amovibles ou fixes
- Décors selon la collection Stiegmeyer-Resopal

## Sommiers



### Sommier à grille métallique

- Matériau acier
- Particulièrement robuste et durable



### Sommier à grille métallique amovible

- Matériau acier
- Particulièrement robuste et durable
- Éléments amovibles individuellement



### Sommier hygiénique

- Matériau polypropylène
- Éléments amovibles individuellement
- En option avec des encoches pour les systèmes de ceinture



### Relève-buste adapté aux appareils de radiographie

- En option pour les sommiers à grille métallique et le sommier hygiénique
- Matériau Plastique plein (HPL)



### Sommier en 2 parties

- relève-buste réglable



### Sommier en 4 parties

- Relève-buste et relève-cuisses réglables

## Roulettes



### Roulette, à blocage individuel

- Ø 125 mm



### Roulette à cache

- Ø 125 mm



### Roulettes doubles

- Ø 150 mm



### Roulette intégrale

- Ø 150 mm

## Galets déflecteurs



### Plastique

- Ø 100 mm
- Matériau : Polyamide (PA6)
- Cône déflecteur de chocs inclus



### Standard

- Ø 100 mm
- Matériau : Polyamide (PA6)
- Cône déflecteur de chocs inclus



### Universel

- Ø 100 mm
- à action horizontale et verticale
- Matériau : Polyamide (PA6), polypropylène (PP), TPE
- Cône déflecteur de chocs inclus

## Autres équipements



### Rallonge de lit

- Rallonge du sommier de 20 cm
- extensible en un tour de main



### Porte-literie

- Possibilité de rangement pendant la préparation du lit
- Facilement extensible au pied du lit



### Réceptacles

- Positionné côté tête pour potence à tube rond ou ovale et support de perfusion



### Réceptacles pour les lits avec rallonge de lit

- Positionnés côté pied
- offrent de la place pour les supports de perfusion



### Revêtement du châssis

- protège les logements des roulettes côté tête et côté pied contre les salissures

# Équipements et options

Deka	Avec réglage en hauteur	Sans réglage en hauteur
<b>Système de protection latérale</b>		
Sans système de protection latérale	✓	✓
Système de protection latérale ¾*	0	0
Système de protection ¾ avec galet déflecteur supplémentaire*	0	0
Système de protection latérale à barreaux continus pouvant être accroché	0	0
<b>Possibilités de réglage</b>		
Sans réglage de la hauteur, sans pivotement, relève-buste mécanique	-	✓
Sans réglage de la hauteur, sans pivotement, relève-buste et relève-cuisses mécaniques	-	0
Réglage de la hauteur, relève-buste, relève-cuisses et pivotement mécanique	✓	-
<b>Pédale de pompage pour réglage de la hauteur hydraulique</b>		
droite	✓	-
droite et gauche	0	-
<b>Design Panneaux de tête et de pied</b>		
Classic, amovible	✓	✓
Classic, fixe	0	0
Valero peint, amovible	0	0
Valero chromé, poteau Niro, amovible	0	0
<b>Couleurs de base</b>		
Blanc cristal NCS SO500N	✓	✓
Argenté similaire à RAL 9006	0	0
<b>Décontamination, degré de protection</b>		
Préparation manuelle, IPX6	✓	✓
Préparation mécanique, IPX6W	0	-
<b>Sommiers</b>		
Sommier à grille métallique soudé	✓	✓
Sommier à grille métallique amovible	0	0
Sommier hygiénique	0	0
Relève-buste adapté aux appareils de radiographie	0	-
En 2 parties	-	✓
En 4 parties	✓	0
<b>Galets déflecteurs</b>		
4 en plastique, sur le pourtour, avec cône déflecteur de chocs	✓	0
4 en plastique, sur le pourtour, sans cône déflecteur de chocs	-	✓
4 standard, sur le pourtour, avec cône déflecteur de chocs	0	0
4 standard, sur le pourtour, sans cône déflecteur de chocs	-	0
2 universels côté tête, 2 standard côté pied, avec cône déflecteurs de chocs	0	0
2 universels côté tête, 2 standard côté pied, avec cône déflecteurs de chocs	-	0
<b>Roulettes</b>		
Roulette, à blocage individuel, Ø 125 mm	✓	✓
Roulette à cache Ø 125 mm	0	-
Roulette intégrale Ø 150 mm	0	-
Roulettes doubles Ø 150 mm	0	-
<b>Garniture des roulettes, conductrice</b>		
1 roulette	✓	✓
2 roulettes	0	0
4 roulettes	0	0

Deka	Avec réglage en hauteur	Sans réglage en hauteur
<b>Pédale de frein</b>		
Plastique avec code couleur	✓	✓
Moulage sous pression chromé	0	0
<b>Position des galets de roulement</b>		
Côté tête, à droite	✓	✓
Côté tête, à gauche	0	0
Côté pied, à droite	0	0
Côté pied, à gauche	0	0
<b>Autres équipements</b>		
Revêtement du châssis	0	-
Rallonge de lit	0	-
Porte-literie	0	0

## Caractéristiques techniques

Toutes les données sont approximatives.

Deka	Avec réglage en hauteur	Sans réglage en hauteur
<b>Poids et mesures</b>		
Dimensions extérieures sans système de protection	95 x 213 cm	95 x 213 cm
Dimensions extérieures avec système de protection	102,5 x 213 cm	102,5 x 213 cm
Sommier (dimension du matelas)	90 x 200 cm	90 x 200 cm
Rallonge de lit	20 cm	-
Répartition du sommier en 2 parties	-	80 – 115 cm
Répartition du sommier en 4 parties	80 – 20 – 35 – 56 cm	80 – 20 – 35 – 56 cm
Compensation de la longueur du relève-buste	8 cm	-
Charge de travail sûre	225 kg	225 kg
Poids maximal du patient	185 – 215 kg	185 – 215 kg
Garde au sol du châssis	15 cm	17,5 cm
Poids total	130 kg	90 kg
Hauteur de protection des systèmes de protection ¾	41 cm	41 cm
<b>Plages de réglage</b>		
Pivotement en position de déclive	16°	-
Pivotement en position de proclive	18°	-
Hauteur de sommier	43 – 83 cm	50/55 cm
Angle relève-buste	jusqu'à 70°	jusqu'à 70°
Angle relève-cuisses	jusqu'à 85°	jusqu'à 85°

## Décors

Silver Grey 0160-60	Snow White 9417-60	Gold 0446-60	Azur 0744-60	Ottawa Maple 4209-60	Eternal Cherry 4325-60
Global Beech 4306-60	Noce Praliné 4452-60	Valley Oak 4166-60	Noce Lyon 4232-60	Baltic Sea D475-60	Storm 10542-60



# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## Siège social / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## Siège social / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
The Estuaries - Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*België / Belgique / Belgium*  
**Distrac Group**  
3320 Hoegaarden  
Bleyveld 14  
Phone +32 (0) 16 76 82 82  
info@distracgroup.com  
www.distracgroup.com

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com