



125 ANS


EXPÉRIMENTÉ
HUMAIN
CIBLÉ SUR LES
SOLUTIONS


STIEGELMEYER
GROUP



Lits de psychiatrie

Concepts modernes pour de nombreuses exigences

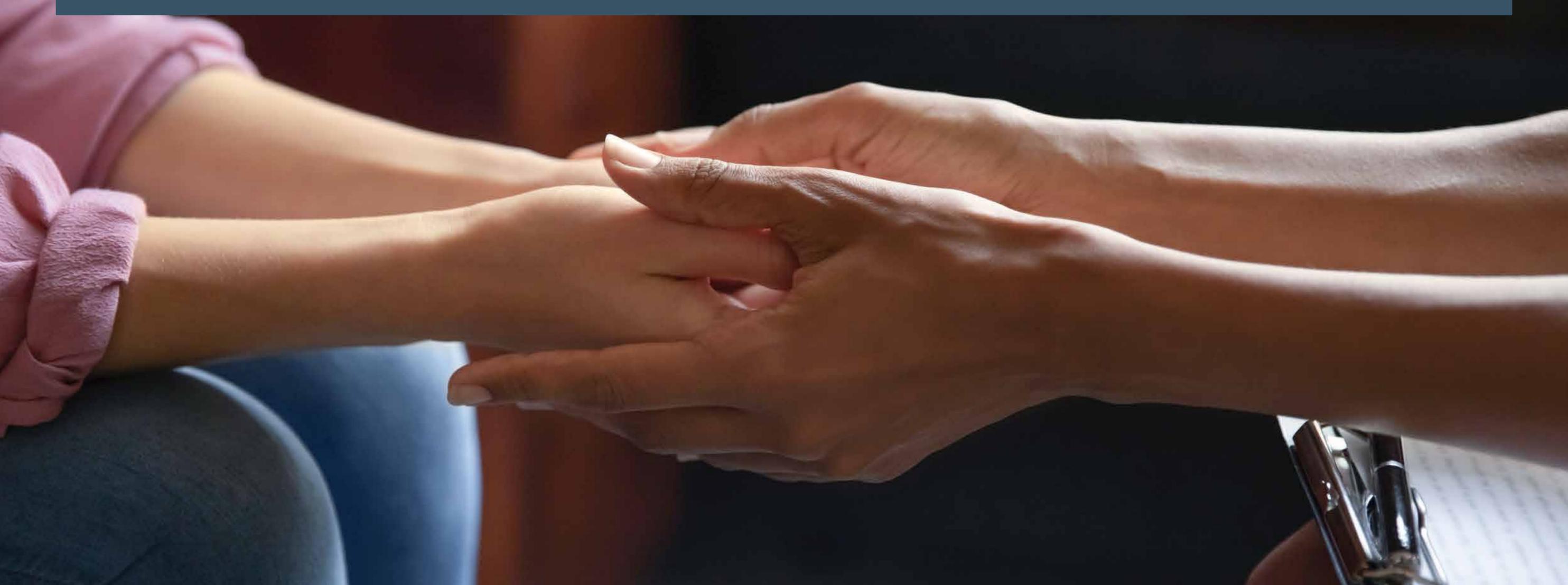

Lits de soins psychiatriques

Sécurité, confort et facilité de manipulation, même dans des situations tendues - telles sont les exigences imposées aux lits de psychiatrie. Plus encore que d'autres produits médicaux, ils doivent être conçus pour répondre à des contraintes physiques particulières, pour protéger le patient tout en lui apportant confort et convivialité, ce qui permet un meilleur processus de guérison. Stiegmeyer propose des solutions innovantes pour répondre à ces exigences. Découvrez nos modèles sur mesure pour les secteurs suivants :

- gériopsychiatrie
- psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
- médecine psychosomatique
- exigences spéciales (par ex. hôpital pénitentiaire, médecine légale)

Lits spéciaux de Stiegmeyer

En 125 ans d'histoire, Stiegmeyer a joué un rôle décisif dans le développement des lits pour les hôpitaux. Qu'il s'agisse de la mobilisation des patients, de la préparation mécanique ou de l'usage, nos lits répondent à des critères élevés. Même dans le domaine de la psychiatrie, vous pouvez faire entièrement confiance à nos produits robustes et sûrs qui soutiennent votre travail.

Sommaire

Gériopsychiatrie	4	Médecine psychosomatique	20
• Puro – le lit hospitalier pour des exigences élevées	6	• Libra – sur mesure pour des exigences individuelles	22
• Tereno – le lit de soins pour se reposer et dormir près du sol	8	• Carino – des idées pour le confort et le bien-être	24
• Elvido rega – le lit de soins mécanique	10	• Caractéristiques des lits de médecine psychosomatique	25
• Elvido vervo – le lit surbaissé polyvalent	11	Lits d'immobilisation pour les hôpitaux pénitentiaires et les services à sécurité renforcée	26
• Classiko – le lit de soins robuste	12	• Deka – le lit stable pour les quotidiens exigeants	28
• Caractéristiques des lits pour la gériopsychiatrie	13	• Caractéristiques Deka	29
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	14	Des compléments judicieux	
• Seta pro junior – le lit hospitalier pour les jeunes	16	• Table de chevet Quado, Aparto, meubles	30
• Carino – le lit flexible pour la psychiatrie de l'adolescent	18	Le groupe Stiegmeyer	31
• Caractéristiques des lits pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	19		



Gérontopsychiatrie

Des exigences pour les besoins des personnes âgées

Les gens vivent de plus en plus vieux - c'est un fait réjouissant. Mais l'augmentation de l'espérance de vie s'accompagne d'un risque accru de maladies qui peuvent affecter le corps et l'esprit.

La recherche médicale sur le vieillissement reconnaît aujourd'hui l'étroite interaction entre les maladies psychiques et les maladies physiques. Ce point est trop souvent négligé, en particulier chez les personnes âgées. Le vieillissement n'est pas un état qui survient soudainement, mais un processus qui concerne toute la vie. Avec ses produits, Stiegmeyer accorde une attention particulière aux résidents et aux patients âgés - en fonction de l'évolution de leurs besoins, de leurs limites physiques et de leurs perspectives de vie, ainsi que des restrictions de mobilité et des capacités cognitives dans l'environnement de la gérontopsychiatrie.

Le groupe Stiegmeyer se distingue de 125 ans d'expérience en tant que fabricant et fournisseur dans le secteur de la santé. Avec des lits et des meubles innovants fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nous sommes un fournisseur de solutions complètes dans les environnements cliniques, hospitaliers et domestiques. Tout en nous orientant sur les aspects psychiques, physiques et sociaux dans leur globalité - tel est notre gamme de produits pour la gérontopsychiatrie.



Puro

Le lit pour des exigences élevées

- Réglage en hauteur : 32 – 91 cm (varie en fonction des roulettes)
- Charge de travail sûre : 275 kg
- Dimensions extérieures : env. 103,5 - 218,5 cm



Tereno

Le lit pour se reposer et dormir près du sol

- Réglage en hauteur : 15 – 80 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Dimensions extérieures (en fonction de la configuration) : env. 104 x 211 cm



Elvido rega

Le lit de soins mécanique

- Réglage en hauteur : 39 – 80 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Dimensions extérieures : env. 100,3 - 211 cm



Elvido vervo

Le lit de soins électrique polyvalent

- Réglage en hauteur : 25 – 80 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Dimensions extérieures (en fonction de la configuration) : env. 104 x 211 cm



Classiko

Le lit de soins mécanique, robuste

- Réglage en hauteur : 40 – 80 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Dimensions extérieures : env. 101 - 208 cm



Puro

Le lit hospitalier pour des exigences élevées

Confort, sécurité, facilité d'utilisation et excellentes propriétés hygiéniques - le Puro est plus qu'un simple lit. Il répond également aux exigences les plus élevées dans le domaine de la psychiatrie. Son système de protection latérale à barreaux discontinus MultiFlex+ offre une protection individuelle tout en permettant d'entrer et de sortir sans encombre. La version lavable en machine du lit, disponible en option, aide chaque établissement à lutter contre les germes multirésistants.

Caractéristiques particulières

- Protection des panneaux de tête et de pied contre une sortie involontaire
- Télécommande pouvant être enfermée
- Sommier avec éléments vissés
- Protection contre la strangulation grâce au câble anaconda
- Logements pour sangles de fixation sur tous les éléments du sommier - y compris l'assise
- Design à faible encombrement et passage de câbles dissimulé



▲ Des rails normalisés avec des encoches pour les sangles permettent d'immobiliser le patient en cas de danger élevé pour lui-même ou pour autrui.



▲ La télécommande LCD peut être enfermée dans le boîtier verrouillable pour la protéger contre toute utilisation abusive.



▲ Le module de commande verrouillable empêche tout déplacement involontaire du lit.



▲ Logement pour sangles de fixation à hauteur de l'assise.



▲ Le câble Anaconda est un câble d'alimentation protégé par une gaine solide afin d'éviter toute utilisation abusive par des patients suicidaires.



Nouveau
Lit ultra surbaissé



Soutien :

- Soins ménageant le dos à une hauteur de jusqu'à 80 cm
- Le châssis sans entretoises longitudinales facilite le nettoyage du sol et l'utilisation du lève-personne



Prévention :

- Concept flexible des éléments latéraux du bien-être à la protection, en passant par la promotion de la mobilisation
- Les panneaux de tête et de pied amovibles sans outil facilitent le quotidien des soins



Tereno

Le lit de soins pour se reposer et dormir près du sol


Le recours à des mesures limitatives de liberté est en contradiction avec l'objectif fondamental des soins, qui est de favoriser la mobilité du patient. Une participation autonome à la vie sociale et une perception positive de son corps ne sont possibles que si le rayon de mouvement est le moins limité possible. Mais cela peut augmenter le risque de chute, en particulier chez les personnes âgées. Spécialement en gérontopsychiatrie, le lit ultra bas Tereno résout cette contradiction. Un repos et un sommeil sûrs à 15 cm du sol combinés à une liberté de mouvement et à une exploitation individuelle des ressources sont ses points forts.

Caractéristiques particulières

- Éviter les mesures de privation de liberté (systèmes de protection latérale, fixations)
- Soutenir le besoin de bouger
- Réduire les séquelles possibles dues aux chutes
- Hauteur de travail correcte et confortable pour le personnel soignant grâce au réglage de la hauteur jusqu'à 80 cm
- Communication respectueuse d'égal à égal avec le patient grâce au réglage individuel de la hauteur et de la position assise

Minimisation des séquelles dues aux chutes :

- Position du sommier ultra-surbaisée avec matelas de protection anti-chute
- Pas de risque que des membres passent sous le lit
- Arrêts intermédiaires à une hauteur ergonomique pour se lever et avant de passer à la zone ultra-surbaisée

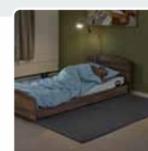

Dispositif numérique :

- Le système Out-of-Bed et les futures fonctions de connectivité peuvent être utilisés



Sécurité bien pensée :

- Freinage automatique en position de sommier la plus basse
- Protection de base, même avec le système de protection latérale non installé, pour empêcher le patient de rouler





Elvido rega

Le lit de soins mécanique

Le lit de soins Elvido rega offre un confort sans câble et renonce presque entièrement aux composants amovibles sans outil. Il contribue ainsi considérablement à la sécurité des patients atteints de maladies psychiatriques ou de démence graves.

Caractéristiques particulières

- Réglage de la hauteur à l'aide d'une pédale hydraulique amovible en option
- Sommier métallique robuste avec grille soudée
- Étriers de fixation optionnels sur les dossiers et les profilés du châssis du sommier
- Idéal pour les pièces sans alimentation électrique



▲ La pédale hydraulique vissée peut aussi être sécurisée sans outil par un système d'aimants (en option).



Elvido vervo

Le lit surbaissé polyvalent


Grâce à sa grande plage de réglage, le lit surbaissé Elvido vervo protège des blessures dues aux chutes, même sans mesures de privation de liberté, et contribue ainsi au bien-être des résidents. Le personnel soignant peut en même temps travailler dans la position la plus haute en ménageant son dos. Le système d'entraînement économique de 24 volts en option augmente la sécurité.

Caractéristiques particulières

- Système Vario-Safe en option pour un remplacement rapide des systèmes de protection latérale, des caches et des panneaux de tête et de pied de lit
- Sécurité optionnelle des fermetures Vario-Safe contre le retrait des éléments sans outils
- Disponibilité d'un système Out-of-Bed intégré
- Choix individuel de décors en bois et de panneaux de tête et de pied de lit confortables



▲ Les fermetures des éléments Vario-Safe peuvent être sécurisées au besoin pour éviter toute utilisation involontaire.

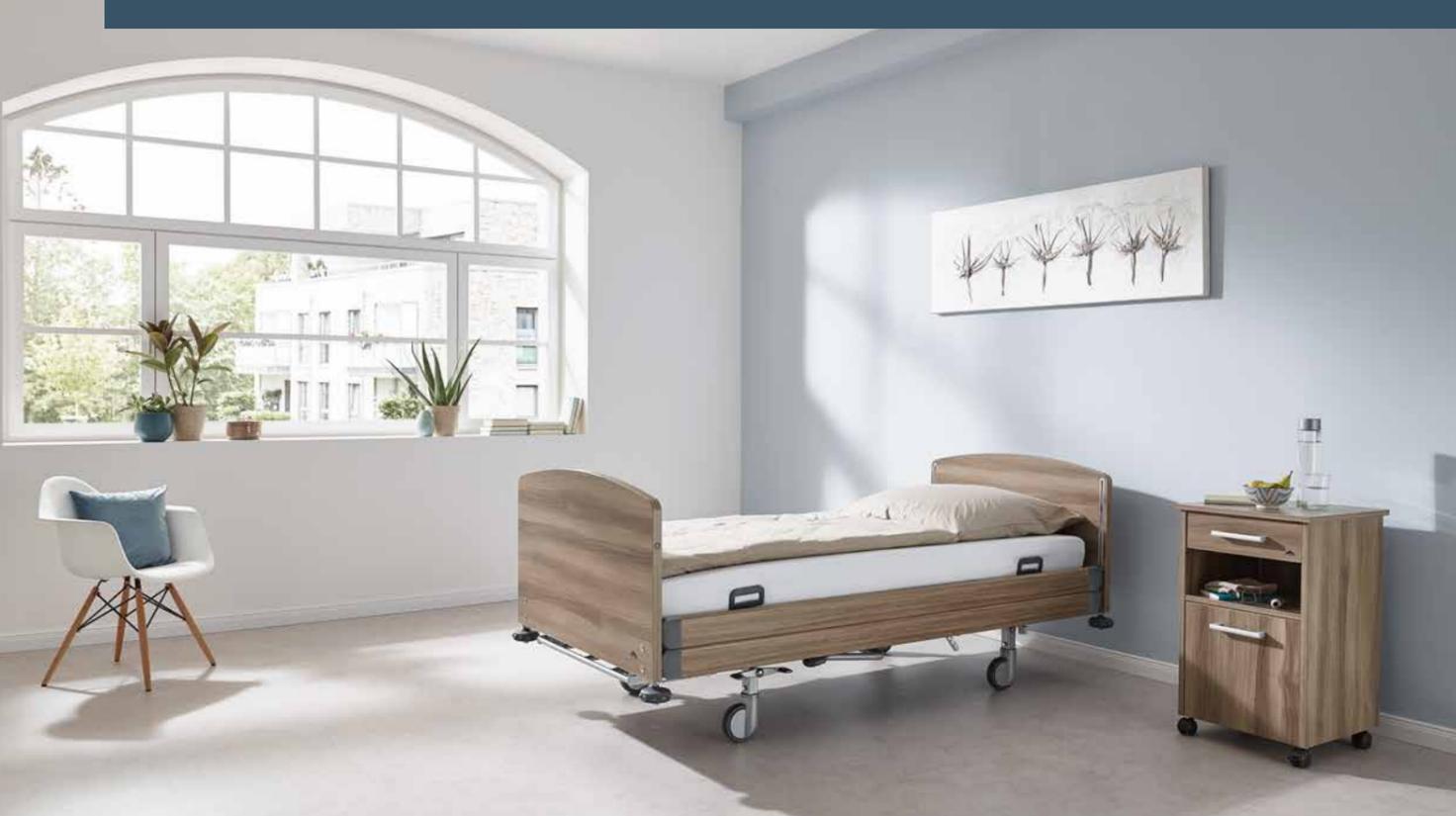

Classiko

Le lit de soins robuste



Confort et sécurité pour les résidents, soulagement pour le personnel soignant et design personnalisé - le Classiko réunit de nombreux points forts pour un bon rapport qualité-prix. Ce lit mécanique répond particulièrement bien aux exigences de sécurité dans les hôpitaux psychiatriques grâce à l'absence de câbles et d'éléments amovibles manuellement. Le personnel soignant peut facilement utiliser le Classiko. Le réglage de la hauteur par pédale à l'aide d'une pompe hydraulique est tout aussi simple que le réglage assisté du relève-buste et du relève-cuisses.

Caractéristiques particulières

- Réglage hydraulique de la hauteur pour un travail ergonomique
- Système de protection latérale continue pour une protection maximale
- Si nécessaire, pédale de pompage amovible pour le réglage de la hauteur
- Étriers de fixation optionnels pour les systèmes de sangles sur le sommier
- Roulettes de 125 mm pour faciliter les manœuvres, même dans les espaces restreints
- Panneaux et décors confortables au choix



▲ Réglage hydraulique par pédale amovible.



▲ Étriers de fixation optionnels sur le cadre du matelas.




▲ Pédale de frein solidement vissée.

Caractéristiques des lits pour la gérontopsychiatrie

	Puro	Tereno	Elvido rega	Elvido vervo	Classiko
Cadre en bois	-	✓	✓	✓	✓
Sommier	Sommier à grille métallique, sécurisé	Sommier métallique	Sommier à grille métallique, soudé, en 4 parties	Sommier hygiénique pour systèmes de sangles	Sommier à grille métallique, soudé, en 4 parties
Fixation du repose-jambes supérieur et inférieur	-	-	0	-	0
Étrier de fixation, vissé	-	-	0	-	0
Logement pour sangles de fixation sur l'assise	0	-	0	-	0
Pédale de pompage sécurisée, amovible sans outil	-	-	0	-	0
Pédale de frein vissée	-	-	0	-	0
Panneaux					
Rondo, vissés, uniquement pour MultiFlex*	0	-	-	-	-
Stelo, vissés, uniquement pour MultiFlex*	0	-	-	-	-
Système de protection latérale					
Système de protection latérale à barreaux continus (fixé en option)	0	-	✓	✓	✓
Système de protection latérale combinable (fixé en option)	-	-	0	0	0
Système de protection latérale à barreaux discontinus (fixé en option)	-	-	-	0	-
Système de protection latérale à barreaux discontinus MultiFlex*	✓	-	-	0	-
Système de protection latérale pivotant, télescopique horizontal inclus	-	✓	-	-	-
Vario Safe	-	0	-	0	-
Réceptacles pour potence à l'intérieur					
Tube ovale ou rond	✓	✓	0	0	0
Autre équipement					
Réglage en hauteur	✓	✓	✓	✓	✓
Inclinaison du sommier	✓	✓	0	✓	0
Avec roulettes et blocage central des roulettes	✓	-	✓	0	✓
Rangement verrouillable pour le boîtier de blocage et l'élément de commande dans le porte-literie	0	-	-	-	-
Boîtier verrouillable pour la télécommande	0	-	-	-	-
Rail de fixation sous relève-buste	0	-	-	-	-
Rail de fixation côté tête et pied	0	-	-	-	-
Cable d'alimentation de type anaconda	0	-	-	-	-
Rallonge de lit	✓	✓	0	0	0
Porte-literie	✓	-	0	0	0

✓ = équipement standard 0 = en option - = non disponible

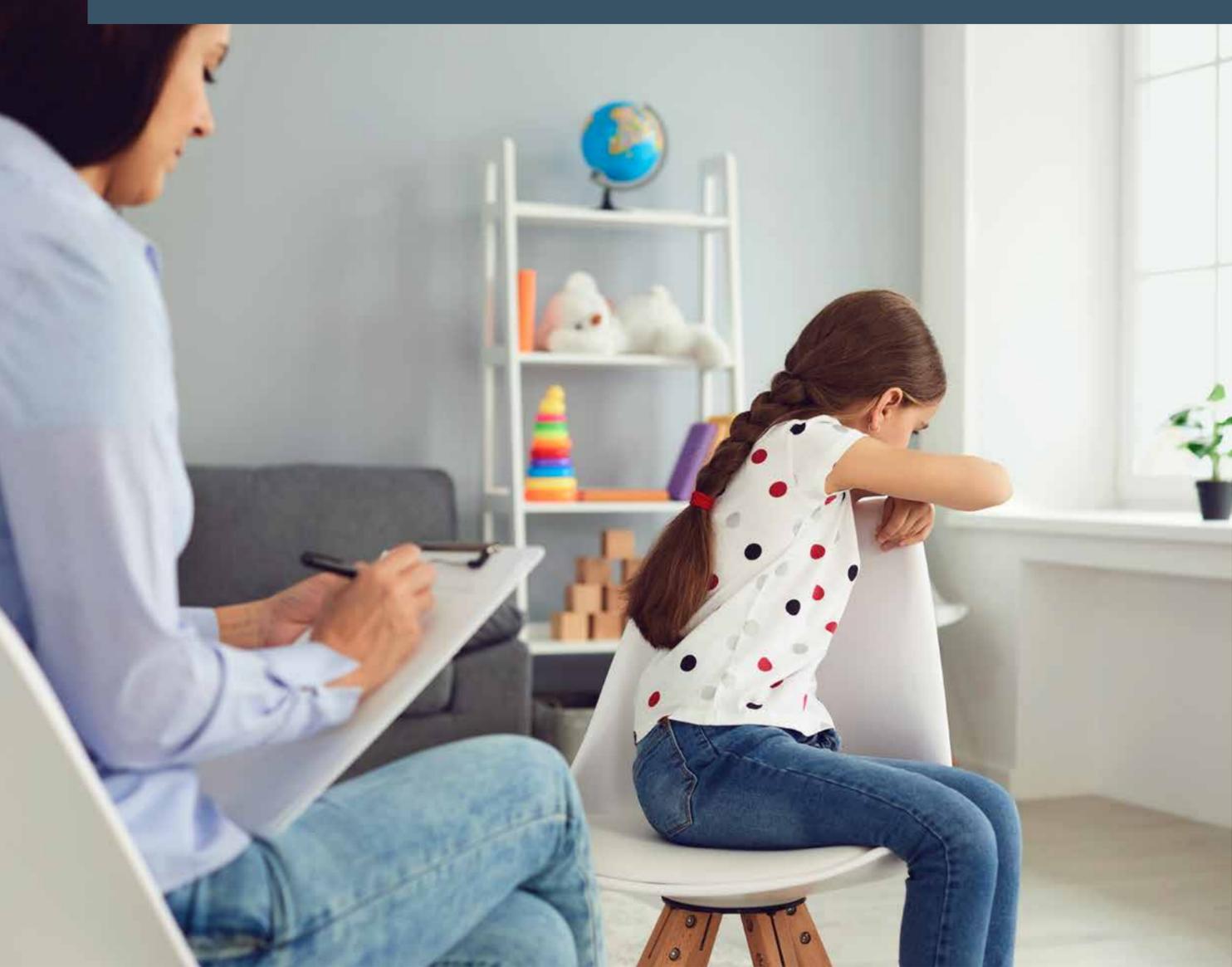

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Exigences en cas de troubles mentaux chez les enfants et les adolescents

La qualité de vie et la santé mentale des enfants et des adolescents ont continué à se dégrader dans de nombreux pays. On observe une augmentation des symptômes dépressifs, des troubles psychosomatiques ainsi que des anomalies psychiques.

Si la décision est prise d'hospitaliser le patient dans un établissement psychiatrique, l'accompagnement thérapeutique peut s'y étendre de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. Il existe de nombreuses possibilités d'utilisation pour la gamme de produits de psychiatrie pour enfants et adolescents de Stieglmeyer, par exemple dans un environnement clinique, dans des centres de rééducation ou dans des foyers spéciaux.

Nos lits offrent un espace de repli protégé, sûr et confortable et avec de nombreuses possibilités d'aménagement dans le domaine de la psychiatrie pour enfants et adolescents.



Seta pro junior Le lit hospitalier pour les jeunes

- Convient aux enfants qui mesurent jusqu'à 155 cm et avec un IMC inférieur à 17
- Dimensions du sommier : 78 x 180 cm
- Réglage en hauteur : 35 – 91 cm
- Charge de travail sûre : 175 kg
- Dimensions extérieures : env. 93 – 193 cm



Carino Le lit confortable pour les jeunes

- Dimensions du sommier : env. 90 x 200 cm ou 100 x 200 cm
- Hauteur du sommier : env. 40 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Dimensions extérieures : env. 105 x 210 cm ou 115 x 210 cm



Conforme à la
norme sur les lits
pédiatriques
EN 50637

Seta pro junior

Le lit hospitalier pour les jeunes


À l'hôpital, les enfants et les adolescents ont particulièrement besoin d'un sentiment de sécurité et d'espace pour s'épanouir. Le Seta pro junior est un espace où l'on se sent bien et qui favorise une guérison rapide. Avec son sommier de 78 x 180 cm, il offre beaucoup de place aux enfants jusqu'à l'adolescence, tout en étant facile à manœuvrer dans les petits espaces. Le lit offre un grand confort grâce à son réglage entièrement motorisé. Si les patients sont limités dans leur mobilité, le système de protection latérale à barreaux continus standard les protège des blessures dues aux chutes. Il est facile à utiliser par le personnel soignant.

Caractéristiques particulières

- Conforme aux normes selon EN 50637
- Systèmes de protection latérale à barreaux continus, intégrés dans le panneau de tête et de pied, pour une protection maximale
- Éléments de sommier sécurisés
- Protection de la télécommande et du module de commande



▲ Dans un compartiment verrouillable, la télécommande en option est protégée contre toute utilisation involontaire.

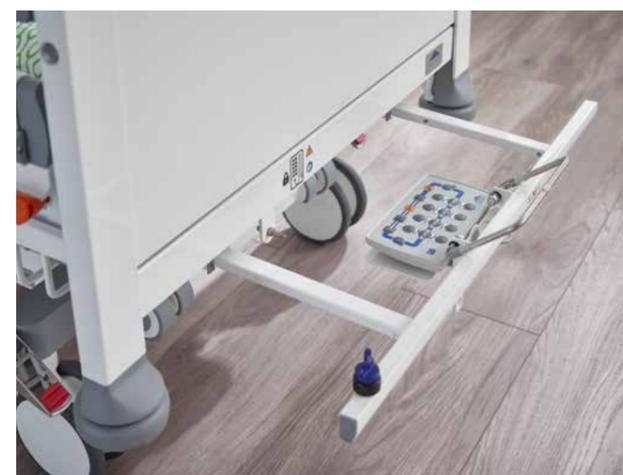

▲ Le porte-literie peut être inséré et verrouillé. Le module de commande est ainsi protégé de manière sûre contre une utilisation non conforme.

Haute sécurité grâce à la norme EN 50637

Le Seta pro junior possède de nombreux détails intelligents pour mettre en œuvre les spécifications de la norme actuelle. Par exemple, des barrières de protection sur le cadre du lit garantissent que les jeunes patients ne peuvent pas glisser ou rester coincés à un endroit quelconque.





Carino

Le lit flexible pour la psychiatrie de l'adolescent

Le Carino est un lit qui offre de nombreuses possibilités d'utilisation. Dans le domaine de la psychiatrie de l'adolescent, il assure une qualité de vie élevée, tout comme dans les centres de traitement psychosomatiques, les centres de rééducation ou les foyers.

Le Carino convainc par son très bon rapport qualité-prix et ses possibilités d'aménagement individuel. Grâce à son sommier métallique robuste, le lit résiste sans peine à de nombreux cycles d'utilisation. Le sommier est disponible en 90 et 100 cm de large, et une rallonge de lit est également disponible pour les utilisateurs de grande taille.

Caractéristiques particulières

- Réglage manuel du sommier en 2 parties et du relève-buste
- Réglage du relève-buste jusqu'à env. 30°
- Traitement hygiénique facile
- Choix de décors en bois
- Pieds chromés
- 2 réceptacles côté tête pour potence ou liseuse

▼ Les lamelles métalliques du sommier se nettoient sans effort.



Caractéristiques des lits pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

	Seta pro junior	Carino
Cadre en bois	-	Renforcé (panneaux/caches multiplex vissés)
Système de protection latérale		
À barreaux continus	✓	-
Design Panneaux de tête et de pied		
Base, non amovible	✓	-
Sommiers		
Lamelles métalliques, en 2 parties	-	✓
Sommier hygiénique PP, en 4 parties	✓	-
Sommier hygiénique PP pour système de sangles, en 4 parties	0	-
Éléments de commande		
Module de commande dans le porte-literie verrouillable	✓	-
1 télécommande standard, 2 boîtiers inclus	0	-
1 télécommande standard, éclairée, 2 boîtiers inclus	0	-
1 télécommande LCD, 2 boîtiers inclus	0	-
Autre équipement		
Porte-literie, verrouillable, module de commande inclus	✓	-

✓ = équipement standard
 0 = en option
 - = non disponible



Médecine psychosomatique

Exigences lorsque l'âme rend le corps malade

La médecine psychosomatique se concentre sur les relations entre le corps, l'âme et les facteurs sociaux. C'est pourquoi les produits de Stiegmeyer offrant convivialité, confort et design de qualité sont au cœur de ce domaine d'application.

Qu'il s'agisse d'une crise existentielle, d'un burnout ou d'un harcèlement moral, l'âme humaine souffre souvent en silence. Un soutien professionnel et un environnement confortable peuvent aider à retrouver une vie sereine.



Libra

Du sur-mesure pour des exigences individuelles

- Dimensions du sommier : env. 90 x 200 cm ou 100 x 200 cm
- Réglage en hauteur : 25 – 80 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Dimensions extérieures :
 - système de protection latérale combinable :
 - pour la largeur de sommier de 90 cm : env. 100,3 x 209,4 cm
 - système de protection latérale à barreaux continus (en fonction de la configuration)
 - pour la largeur de sommier de 100 cm : env. 110,3 x 209,4 cm
 - système de protection latérale :
 - pour la largeur de sommier de 90 cm : env. 104,0 x 209,4 cm
 - pour la largeur de sommier de 100 cm : env. 114,0 x 209,4 cm



Carino

Le lit confortable et flexible

- Dimensions du sommier : env. 90 x 200 cm ou 100 x 200 cm
- Hauteur du sommier : env. 40 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Dimensions extérieures : env. 105 x 210 cm ou 115 x 210 cm



Libra

Du sur-mesure pour des exigences individuelles

Le Libra est un lit qui évolue avec les exigences de ses utilisateurs. Grâce à son système Vario-Safe flexible, les panneaux, les caches latéraux et les systèmes de protection latérale peuvent être remplacés en quelques secondes. Vous souhaitez un nouveau design ou plus de protection la nuit ? Disposez alors les éléments de manière à ce qu'ils répondent à vos besoins.

Caractéristiques particulières

- Éléments de systèmes de protection latérale et caches dans différentes longueurs
- Contrôle sans effort grâce à une commande manuelle intuitive
- Sommier confort pour un sommeil reposant
- Position fauteuil pour lire et regarder la télévision
- Décors en bois attrayants et rembourrages fixes pour tous les styles d'aménagement



En tant que lit bas avec des systèmes de protection latérale à barreaux discontinus en option, le Libra offre une grande sécurité et en même temps une liberté de mouvement totale. La position basse minimise le risque de blessures dues à une chute, et le système de protection latérale, placé côté tête, laisse de la place pour entrer et sortir. Nous suivons ainsi la philosophie du « Werdenfeller Weg » qui consiste à renoncer aux mesures de privation de liberté.

Caractéristiques particulières

- Systèmes de protection latérale à barreaux discontinus en option pour une protection individuelle dans toutes les situations
- Retrait sans outil de tous les systèmes de protection latérale avec le système Vario-Safe ou Easy-Click
- Aspect chaleureux grâce au choix de panneaux de tête et de pied, de décors en bois et de rembourrages



Carino

Des idées pour le confort et le bien-être

Stable, durable, confortable et extrêmement flexible - le Carino est un lit qui offre de nombreuses possibilités d'utilisation et d'aménagement. Dans les centres de traitement psychosomatiques, il assure une qualité de vie élevée et convainc par son très bon rapport qualité-prix.

Le design du lit est sobre et élégant et peut être adapté à l'ameublement de la pièce grâce à une multitude de formes de panneaux de tête et de pied de lit au choix et de décors en bois.

Les couvertures textiles souples en option pour les panneaux et les côtés du lit constituent des éléments de design particuliers. Des tissus aux couleurs et aux motifs attrayants transforment au besoin le Carino en point central de la pièce.

Avec un panneau fixé sur le côté du lit en option sur un côté longitudinal, le lit peut également servir de canapé confortable pendant la journée.

Caractéristiques particulières

- Réglage manuel du sommier en 2 parties et du relève-buste
- Traitement hygiénique facile
- Réglage du relève-buste jusqu'à env. 30°
- Pieds chromés
- 2 réceptacles côté tête pour potence/liseuse
- Tablette peu encombrante comme accessoire pratique

Caractéristiques des lits pour la médecine psychosomatique

	Libra	Carino
Configuration des parties bois au choix	✓	Renforcée (panneaux/caches multiplex vissés)
Systèmes de protection latérale		
Système de protection latérale à barreaux continus DSE Easy Click	✓	-
Système de protection latérale combinable KSE Easy Click	0	-
Système de protection latérale à barreaux discontinus avec Vario Safe	0	-
Sans système de protection latérale	0	✓
Sommiers		
Sommiers à lamelles métalliques	✓	-
Lamelles métalliques, en 2 parties	-	✓
Sommier, en 4 parties, à réglage électrique	✓	-
Sommier pivotant en position de proclive	✓	-
Sommier pivotant en position de déclive	0	-
Habillage du sommier confort	0	-
Sommier hygiénique	0	-
Roulettes		
Roulettes doubles	Ø 50 mm	-
Blocage des roulettes par essieu	✓	-
Blocage des roulettes central	0	-
Composants électroniques		
Télécommande (verrouillable de manière sélective)	✓	-
Télécommande supplémentaire pour Trendelenburg	0	-
Éclairage sous le lit	0	-
Télécommande éclairée avec Trendelenburg	0	-
Autre équipement		
Réglage en hauteur	✓	-
2 réceptacles côté tête pour potence/support de perfusion	✓	-
Déclenchement d'urgence du relève-buste	0	-
Rallonge de lit d'env. 20 cm	0	-
Porte-literie ¹⁾	0	-

✓ = équipement standard
0 = en option
- = non disponible

¹⁾ impossible en cas de système de protection latérale intégré



Médecine carcérale

Exigences pour les zones sensibles avec sécurité renforcée

Les soins en milieu carcéral ne diffèrent que très peu des soins dispensés à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire. Car même en détention, les personnes ont besoin de soins médicaux. Le travail quotidien comporte toutefois des particularités et des défis importants. Les aspects de sécurité sont primordiaux et ont également un impact sur le choix de lits hospitaliers appropriés. Les expériences de nos clients et les exigences de la pratique dans les secteurs protégés de la psychiatrie ont servi de base à la définition des 3 variantes du lit de psychiatrie Deko pour l'exécution des peines décrites ci-dessous. Pour toutes les versions, les réglages motorisés ont été systématiquement abandonnés dans l'intérêt d'une sécurité maximale.



Deko

Variante 1

- Logements pour sangles de fixation sur le cadre du sommier et également sur le relève-buste réglable
- Réglage en hauteur hydraulique
- Panneaux de tête et de pied fournis dans 2 variantes design et vissés
- Sommier en 4 parties et option de blocage du réglage du relève-jambes
- Remplacement optionnel des roulettes par des pieds fixes pour fixation au sol



Deko

Variante 2 :

- Rails normalisés en acier inoxydable sur le cadre du sommier avec des séparations pour la fixation de sangles de fixation et, également avec des étriers de fixation sur le relève-buste
- Panneaux de tête et de pied exclusivement dans le design Classic, rabattables et sécurisés par des aimants
- Réglage en hauteur hydraulique
- Sommier en 4 parties et option de blocage du réglage du relève-jambes
- Remplacement optionnel des roulettes par des pieds fixes pour fixation au sol




Deko

Variante 3 :

- Sommier en 2 parties
- Châssis avec 4 pieds
- Non réglable en hauteur, non mobile
- Étriers de fixation sur le cadre du sommier et sur le relève-buste comme variante 1




◀ Systèmes de sécurité latérale à barreaux continus pouvant être accrochés ultérieurement ou vissés.

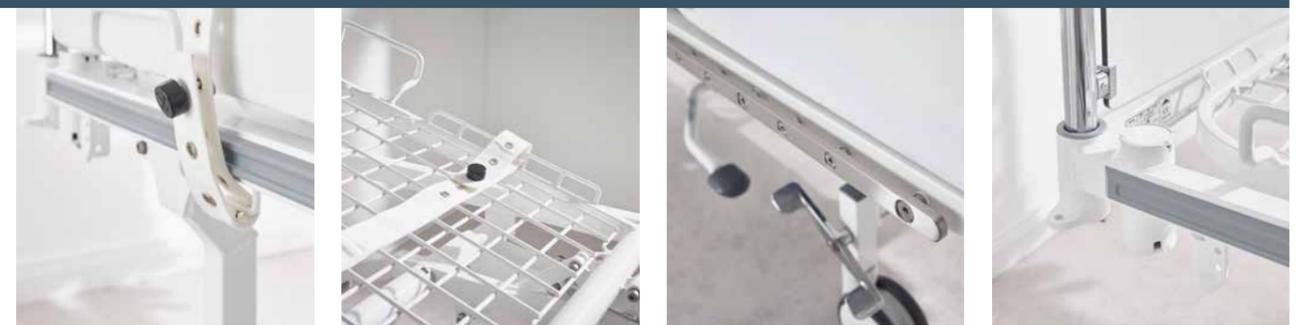

▲ Étriers de fixation sur le cadre du matelas et sur le relève-buste.

▲ Rail normalisé sur le cadre du matelas.

▲ Réceptacles verrouillés

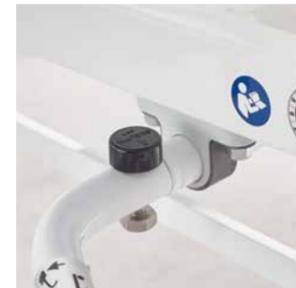

▲ Sécurisation de la pédale de hauteur avec le système Segufix.



▲ Sécurisation de la pédale de hauteur avec une goupille.



▲ Déclenchement alternatif des dossiers sur le ressort à gaz.

Deka

Le lit stable pour les quotidiens exigeants

La sécurité des patients et du personnel soignant est au premier plan pour toutes les variantes du lit de psychiatrie Deka. Outre l'absence d'entraînement électrique, les possibilités de réglage mécanique peuvent être limitées au besoin ou l'accessibilité de la commande des vérins à gaz et des systèmes hydrauliques complexifiée. Le sommier est constitué d'une grille métallique soudée protégée contre le retrait.

Deux designs de panneaux sont disponibles : Avec sa poignée périphérique, le modèle de tête de lit Classic offre beaucoup de place pour fixer des accessoires. Il en va de même pour notre panneau Valero, qui séduit également par son design moderne et attrayant. Les deux modèles peuvent être sécurisés pour éviter tout retrait involontaire.



▲ Panneau Classic.



▲ Panneau Classic, renforcé côté pied.



▲ Panneau Classic, rabattable à 180° côté pied.



▲ Panneau Valero.



▲ Pieds pour la fixation du lit au sol.



▲ Pédale de frein vissée.

Caractéristiques des lits d'immobilisation

	Deka Variante 1	Deka Variante 2	Deka Variante 3
Cadre du matelas	avec étriers de fixation	avec rail normalisé	avec étriers de fixation
Sommier	Sommier à grille métallique, solidement soudé, en 4 parties	Sommier à grille métallique, solidement soudé, en 4 parties	Sommier à grille métallique, solidement soudé, en 2 parties
Relève-buste avec des étriers de sangle de fixation soudés	✓	✓	✓
Relève-jambes supérieur et inférieur pouvant être bloqué	0	0	-
Panneaux			
Classic, fixe	0	-	0
Classic côté pied, fixe et renforcé	0	0	0
Classic côté pied, fixe et renforcé, rabattable à 180°	0	0	0
Classic, rabattable à 180°	0	✓	-
Valero, fixe, poteau en acier inoxydable	0	-	0
Valero, amovible avec sécurité pour système de protection latérale à barreaux continus	0	-	0
Système de protection latérale			
sans	✓	✓	✓
Système de protection latérale à barreaux continus pouvant être accroché	0	0	0
Système de protection latérale ¾	0	-	0
Réceptacles pour potence à l'intérieur			
Tube ovale ou rond	✓	✓	✓
Réceptacles verrouillés	0	0	0
Autre équipement			
Réglage en hauteur	✓	✓	-
Inclinaison du sommier	0	0	-
Pour fixation au sol	✓	✓	✓
Avec roulettes à blocage individuel	-	-	0
Avec roulettes et blocage central des roulettes	0	0	-
Pédale de pompage sécurisée amovible sans outil	0	0	-
Rallonge de lit	0	0	0
Porte-literie	0	0	0

Des compléments judicieux

Cela pourrait aussi vous intéresser !



▲ La table de chevet étroite Quado convient particulièrement bien à la vie quotidienne à l'hôpital dans des espaces restreints. Si la tablette de lit n'est pas utilisée, elle peut être abaissée facilement et en douceur. Pour le déplacement simultané avec le lit, le Quado peut être accroché au panneau.



▲ La nouvelle série de tables de chevet Aparto associe les tendances modernes en matière de soins, un design confortable et des possibilités d'aménagement sur mesure. Si un modèle Aparto est équipé d'une tablette de lit intégrée, son caisson peut être tourné en quelques secondes. Ainsi, la table de chevet peut être utilisée à tout moment des deux côtés du lit et s'adapte aux exigences et aux conditions changeantes de la chambre.



Connaissez-vous déjà notre gamme de meubles de sièges et de tables ?
N'hésitez pas à nous contacter !

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Le groupe Stieglmeyer est le leader allemand dans la fabrication de lits médicaux pour les hôpitaux, les établissements de soins et les soins à domicile. Avec ses tables de chevet, meubles et systèmes d'assistance numériques modernes, il est aussi un fournisseur innovant de solutions globales. L'entreprise familiale développe avec succès des offres pour les marchés internationaux dans plus de 100 pays.

Nos points forts :

- Le développement des produits est piloté au sein de notre siège à Herford en Allemagne – la production s'effectue dans quatre usines modernes en Allemagne et en Pologne
- La fabrication en Chine pour le marché chinois
- Des filiales et partenaires de distribution dans de nombreux pays
- Un service de premier ordre avec une livraison fiable des pièces de rechange
- Des formations et optimisations des processus pour nos clients
- Une action durable avec un fort engagement social

Notre expertise

- Hôpital
- Long séjour
- Soins à domicile
- Lits exclusifs
- Mobilier
- Service

Nos valeurs

- Expérience
- Humain
- Fiabilité
- Ciblé sur les solutions
- Ouverture
- Confiance

1 000 COLLABORATEURS DANS LE MONDE ENTIER

11 SITES en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Finlande, en Afrique du Sud et en Chine

Des OFFRES sur mesure pour tous les MARCHÉS

PLUS DE 100 000 lits produits par an

CERTIFICATIONS internationales

JUSQU'À 15 ANS de livraisons de pièces détachées

DISTRIBUTION dans plus de 100 pays

INGÉNIERIE ALLEMANDE





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France

Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium

Distrac Group
3320 Hoegaarden
Bleyveld 14
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China

Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com