



**Votre partenaire en salle d'accouchement
Partura® – Le lit d'accouchement**



A Sense of Company

Forte plus de de 95 ans d'expérience, l'entreprise SCHMITZ a su se hisser parmi les premiers fabricants de produits médico-techniques au niveau international.

Dans cette entreprise familiale, la tradition est une véritable vocation. En moyenne, nos collaborateurs sont au service de l'entreprise depuis 18 ans, prouvant leur attachement à nos valeurs et à la philosophie de l'entreprise.

En 2012, Friedrich et Matthias Schmitz, représentant la 4^e génération, ont repris les rênes de l'entreprise.

Nous nous revendiquons comme une entreprise allemande et sommes bien ancrés dans notre région d'origine. Nous développons et produisons ici.

Nous travaillons avec des fournisseurs à 90 % allemands et provenant à 60 % de la région.

Made in Germany



'La transmission à la nouvelle génération a toujours été et restera toujours un grand événement chez nous.'



A Sense of Care

Nous comprenons les besoins de nos clients ; nous proposons donc des services et les réalisons en ayant à cœur de les satisfaire au mieux. Depuis le conseil jusqu'à la mise en place en passant par la planification.


Ce que vous pouvez attendre de nos produits : un bon retour sur investissement de par une longue durée de vie.

Mais ce n'est pas tout : un concept de service bien pensé et un accompagnement après achat très complet. Dès le début, SCHMITZ se tient à vos côtés en tant que partenaire.

Service d'assistance technique client

tél. +49 (0)2377 84 549

service@schmitz-medical.com

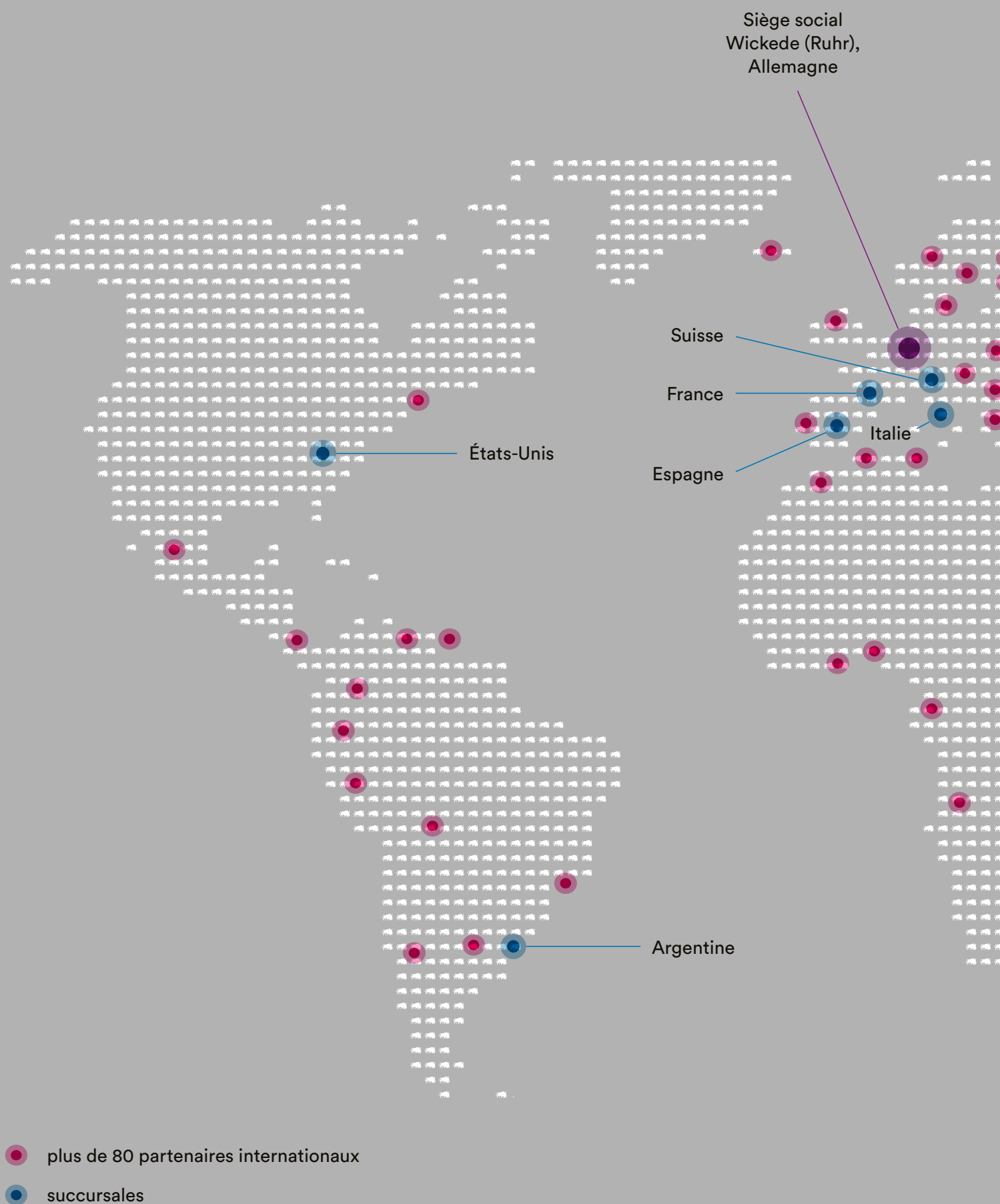

SCHMITZ – représenté partout dans le monde





Idée : Karin Berghammer / Iris Podgorschek
Design : podpod design

Partura® CE^{MD}**confortable et à usage multiple – en toute sécurité**

Offrir à la future mère une très grande liberté de mouvement durant les phases de travail et de délivrance, et permettre à tout moment un réglage du lit personnalisé via une commande manuelle : telle est la maxime qui a accompagné la conception de notre lit d'accouchement.

Le matelas est large, confortablement rembourré, pour une assistance active par le partenaire. La partie pieds du lit peut aussi être utilisée par la sage-femme comme siège.

Le lit d'accouchement de SCHMITZ satisfait à toutes les exigences :

Il réunit le design correspondant au confort élevé pour la future mère et les conditions de travail optimales pour l'équipe d'accoucheurs.

En outre, le revêtement lisse et fermé et les surfaces des matelas sont faciles à nettoyer et à désinfecter.

Et – si nécessaire –, en un tour de main, les positions du lit peuvent être modifiées pour permettre une intervention médicale rapide.

Partura® – Le lit d'accouchement pour une naissance en toute sécurité et en douceur.





Partura®

confortable et à usage multiple – en toute sécurité

Polyvalence d'utilisation

Partura® se démarque en ce qu'il propose de très nombreuses positions d'accouchement tout en laissant une très grande liberté de mouvement.

Personnaliser par la couleur

Se déclinant dans une large palette de couleurs, le Partura® s'intègre parfaitement dans vos locaux où il contribue à installer une ambiance agréable.

Si vous le souhaitez, vous pouvez tester toutes les combinaisons possibles. Utilisez notre configurateur de couleurs sur notre site web, voir le code QR au bas de cette page.

Faire l'expérience de la Vie ensemble

L'accompagnement de l'accouchement par le partenaire : une belle expérience pour la future famille.

Comme le lit propose un grand plan de couchage et une partie pieds escamotable, le partenaire peut être impliqué dès qu'il le souhaite.

Découvrez notre
nouveau configurateur de
produit et de couleurs :



Partura®

Positions



Période de dilatation

Lit en position basse (64 cm) permettant de passer de la relaxation aux mouvements, la position basse facilite la montée et la descente du lit



Accouchement en position de lithotomie

position classique



Accouchement en position dorso-sacrée décline

en cas de dystocie par présentation de l'épaule, d'intervention opératoire ou en intervention manuelle



Période de dilatation et/ou période de transition en position gécubitale

en cas de compression d'urgence pour rétention utérine ou asphyxie intra-utérine




Accouchement en position gécubitale

en cas de multiparité avec antécédents d'épisiotomie pour dégager le périnée et pour enfants particulièrement volumineux




Post partum d'accouchement en position gécubitale

Après la naissance, la nouvelle mère peut simplement se rasseoir, sans avoir à se retourner

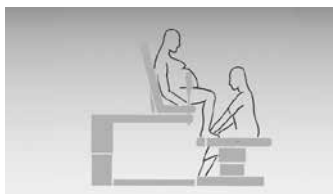

Période d'expulsion en position verticale avec le dossier surélevé

Position assise confortable : grâce au déplacement du matelas, il n'y a pas de pression sur le périnée. La femme n'a pas besoin d'assistance, une aide manuelle en position du siège est possible

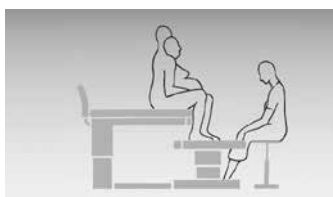

Période d'expulsion en position verticale avec assistance du partenaire
la parturiente peut s'appuyer contre le partenaire, il y a contact corporel




Accouchement sur tabouret haut
Optimisation de l'axe de naissance, cyphose maximale, soulagement du périnée



Accouchement sur tabouret haut avec l'aide du partenaire
qui peut soutenir la parturiente au passage de la tête, contact corporel




Accouchement opératoire
Extraction au forceps ou à la ventouse. Aide manuelle en position du siège
soins post-partum du périnée en cas d'extraction manuelle du placenta

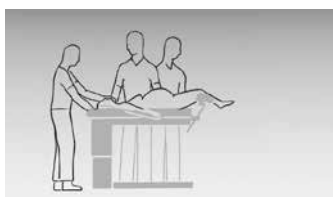

Césarienne en salle de travail
en cas d'indication absolue



Position de choc
en cas de procidence du cordon ombilical ou de collapsus circulatoire

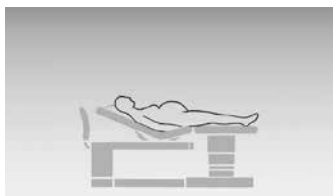

Soulèvement des jambes
pour la relaxation

Partura® et accessoires

N° modèle	Description
-----------	-------------



140.1010.0 Lit d'accouchement Partura®

Partie principale avec siège et dossier, partie pieds.
Équipement mobile grâce à des roulettes directionnelles avec dispositif de blocage centralisé par pédale. La partie principale et la partie pieds peuvent être découplées, la partie pieds se poussant sous la partie principale et s'y bloquant dans quatre positions possibles. Fournie avec deux commandes manuelles filaires.

Vous trouverez l'équipement fourni de série avec le lit d'accouchement Partura® à la page 19.



104.6010.0 Coussin pour soutenir le dos

104.6020.0 Housse (sans ill.) pour matelas en deux parties, blanche, lavable jusqu'à 95 °C

N° modèle	Description
-----------	-------------



104.6030.0	Etrier de maintien sert à stabiliser la ceinture scapulaire, en tube d'acier, revêtu par poudrage, inclinable et réglable en hauteur, avec deux étaux réglables en acier inox, fixé aux rails latéraux
-------------------	--




104.6040.0	Supports latéraux (paire) amovibles, en tube d'acier thermolaqué, pièces de fixation en acier inox, montage aux deux côtés du dossier
-------------------	---



104.6050.0	Cuvette en acier inox 18/10, 355 × 325 × 100 mm (L x l x p)
-------------------	---



104.6060.0	Supports-pieds (paire) éléments de fixation en acier inox 18/10, plaques de pieds en matière plastique grise
-------------------	--

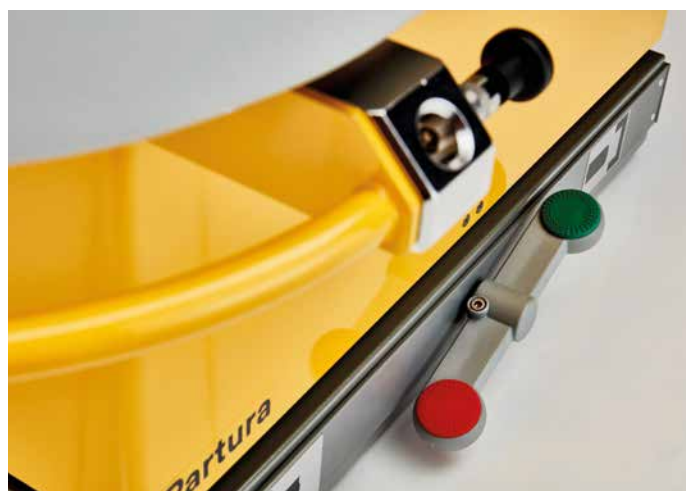

Partura®**un lit entièrement équipé pour accoucher
dans le confort**

Pour faciliter l'accès de la sage-femme ou du médecin, la partie pieds peut être découplée de la partie principale et ainsi servir de siège ou pour poser les ustensiles.

- Réglages simultanés et/ou individuels de la hauteur de la partie principale et de la partie pieds par moteur électrique.
- Nettoyage et désinfection faciles grâce aux surfaces fermées et lisses et aux matelas amovibles.
- Mobile grâce aux roulettes pivotantes avec blocage central.
- 22 coloris standard pour une coloration attractive.
- Un grand choix d'options de réglage, une stabilité élevée et beaucoup d'espace pour des positions soulageant l'accouchement – en incluant le partenaire.
- Fonction de réglage électrique via deux commandes manuelles facilement accessibles.
- Démarrage doux (sans à-coups) des mouvements de réglage.
- Dossier multifonctionnel à emboîter dans la partie principale ou dans la partie pieds.
- Appuis-jambe avec articulation à rotule pour un réglage rapide de la position de rangement vers la position d'utilisation.
- Sécurité de fonctionnement en cas de brève interruption de courant grâce aux batteries intégrées.



Les appuis-jambes peuvent être vite et facilement pivotés sous le plateau et en cas de besoin remis dans la position utile.



Le dossier peut également être emboîté dans la partie pieds.



Dépôt des poignées du côté tête en cas de non-utilisation.



Interrupteur principal, prise d'équipotentialité, indicateur de l'état de charge des batteries, prise CEI 60320 C13.



La potence à perfusion peut être fixée aux deux côtés de la tête.



Levier de blocage de la partie pieds.



Poignées pour un déplacement aisé de la partie pieds.



Poignées pour un déplacement aisé de la partie pieds.
Deux télécommandes manuelles avec câble spiralé, fixées aux deux côtés de la partie principale.

Partura® C€^{MD}**Equipement standard**

Partie principale avec siège et dossier, partie pieds ; mobile avec des roulettes pivotantes, blocage central. Les parties principale et pieds sont séparables. La partie pieds peut être poussée sous la partie principale, 4 positions d'accrochage. Partie siège avec ouverture, rayon 150 mm.

Matelas en 2 parties pour la partie principale et pieds, en matière mousse hautement élastique et à revêtement, imperméable à l'humidité et empêchant les glissements.

1 garniture en 2 parties, blanche, résiste aux températures de lavage jusqu'à 95 °C.

Les revêtements et le cadre sont en tôle d'acier à revêtement thermolaqué, couleurs selon nuancier SCHMITZ. Le dossier peut être emboîté dans la côté tête ou pieds, avec rembourrage en similicuir en gris pierre 96.

2 appui-jambes système Göpel, acier inox 18/10, rembourrage intégré en mousse, gris argenté, réglable en hauteur. 2 articulations tournantes pour recevoir les appui-jambes. Mise en place rapide des supports-jambes. 2 poignées en acier inox 18/10, mousse intégrée, gris argenté, à emboîter latéralement.

Tige à perfusion à 4 crochets, en acier inox 18/10, pour fixer au côté tête et au voisinage des poignées, réglable en hauteur. Dossier au voisinage de l'ouverture du siège, demi-rond, mousse intégrée, gris argenté, pour la naissance en position accroupie.






2 télécommandes manuelles avec câble spiralé, fixée aux deux côtés de la partie principale ; pour les réglages continus par des moteurs électriques :

- Réglage en hauteur de la partie principale
- Réglage du dossier
- Réglage du siège
- Inclinaison de la partie principale (position choc)
- Réglage en hauteur de la partie pieds (si elle est accrochée à la partie principale)

Sécurité de fonctionnement en cas de brève interruption de courant grâce aux batteries intégrées.

Couleurs

- Matelas en 2 parties pour la partie principale, partie pieds : gris pierre 96
- Rembourrage du dossier : gris pierre 96
- Supports-jambes, poignées et dossier demi-rond : mousse intégrée gris argenté
- Revêtements en tôle d'acier : thermolaqués selon nuancier SCHMITZ

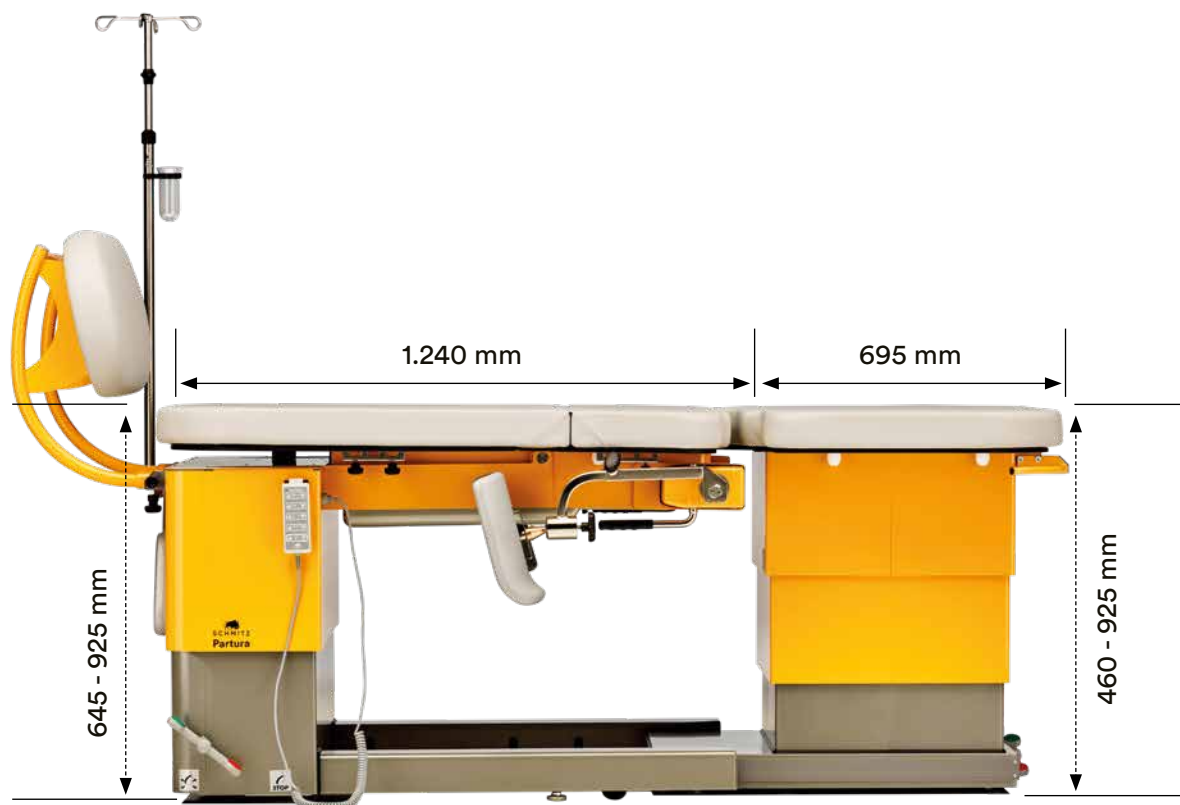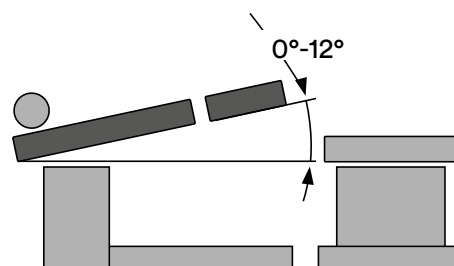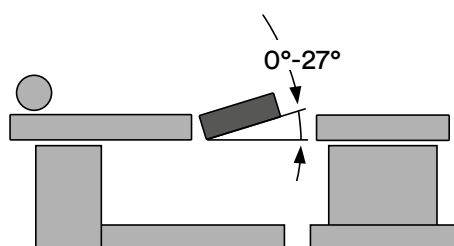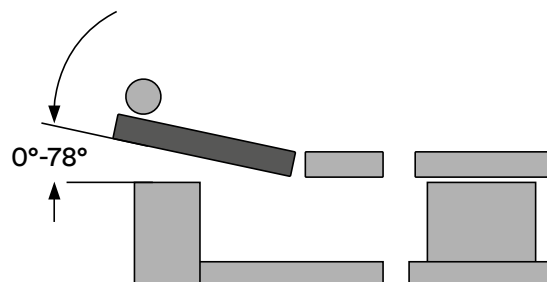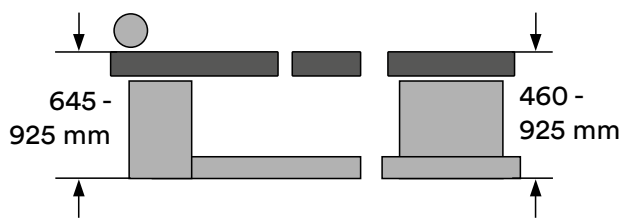

Partura®**Fonctions de réglage et dimensions****Dimensions**

Réglage en hauteur de la partie principale	de 645 à 925 mm
Réglage en hauteur de la partie pieds (possible seulement en liaison avec la partie principale)	de 460 à 925 mm
Dimensions extérieures du lit d'accouchement avec le dossier emboîté	2.330 × 1.015 mm (L x l)
Couche	1.950 × 950 mm (L x l)
Longueur du matelas du dossier	890 mm
Longueur de matelas du siège	350 mm
Longueur de matelas de la partie pieds	695 mm
Épaisseur du matelas	80 mm
Angle d'inclinaison de la partie principale	0 à 12° (position choc)
Angle d'inclinaison du dossier	0 à 78°
Angle d'inclinaison du siège	0 à 27°
Charge maximale d'utilisation (partie principale)	220 kg
Charge maximale d'utilisation (partie pieds)	135 kg
Poids, partie pieds	110 kg
Poids, partie principale	265 kg
Poids total	375 kg
Tension du réseau	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	max. 0,76 KW
Classe de protection	I






Couche de laque



blanc gris
RAL 9002

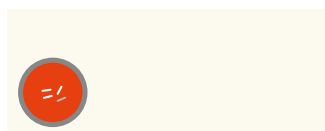

blanc pur
RAL 9010



blanc nénuphar
RAL 0758510



orange safran clair
RAL 0608530




jaune de sécurité
RAL 1003



orangé sang
RAL 2002



rose lotus
RAL 3608510



blanc lilas tricot
RAL 3108510



bleu tennis
RAL 2307020



bleu clair
RAL 2606030



bleu saphir
RAL 5003




bleu délavé
RAL 2308010



vert citron
RAL 1008060



vert filigrane
RAL 1207020



vert glacé
RAL 1209030



aluminium blanc
RAL 9006



aluminium gris
RAL 9007



gris anthracite
RAL 7016



antimicrobien
Ces couleurs ont des propriétés antimicrobiennes



Couleurs pour rembourrages et peintures

Voyez le monde en couleurs

Associez à votre guise les 19 teintes de coussin et les 18 teintes de peinture pour créer différentes ambiances dans vos salles d'examen.

Froide ou vive, classique ou moderne, élégante ou extravagante, chez nous, vous trouverez rapidement la couleur qui vous convient.

Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



Laissez-vous inspirer :
www.schmitz-medical.com

Nous recommandons :

Accessoires pour le nettoyage des rembourrages

2026973



N° modèle	Description
2019878 (sans ill.)	Produit de nettoyage spécial pour similicuir Vaporisateur de 500 ml (vendus par 3)
2026973	Set de nettoyage pour similicuir 1 x vaporisateur de 500 ml et 1 brosse

Vous trouverez toutes les informations concernant le nettoyage et la désinfection des rembourrages dans le mode d'emploi spécifique.



‘ Une entreprise forte, sur laquelle on peut compter – compétente, sincère, loyale et fiable. ’

Ces valeurs se reflètent dans nos produits et leur qualité. Une combinaison de durabilité, de technologie de pointe qui fait référence et un design attrayant.

L’innovation, c’est une tradition chez nous. Depuis plus de 95 ans, nous développons et produisons des produits de technologie médicale auxquels les médecins et les patients du monde entier font confiance.

Nos produits sont créés en étroite collaboration avec des professionnels de la santé et grâce à l’expertise et à la passion de nos collaborateurs.

Grâce à un développement constant et à nos exigences élevées en matière de qualité et de fonctionnalité, SCHMITZ occupe une position de leader sur le marché avec ses produits et ses services.

SCHMITZ – votre partenaire pour la technique médicale dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.







Contact

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne



Tous les dispositifs portant le marquage CE des dispositifs médicaux, en lien avec nos accessoires, se conforment aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ainsi qu'aux exigences de la loi portant modification de la loi sur les dispositifs médicaux, et sont considérés comme des dispositifs médicaux de la classe de risque I.



Tous les dispositifs portant le simple marquage CE se conforment aux exigences de la Directive basse tension 2014/35/UE ainsi qu'à celles de l'Ordonnance sur le matériel électrique.

Pour connaître les utilisations prévues, veuillez également vous référer aux instructions d'utilisation !

tél. +49 (0)2377 84 0

téléc. +49 (0)2377 84 135

zentrale@schmitz-medical.com

Département des exportations :

tél. +49 (0)2377 84 0

téléc. +49 (0)2377 84 135

export@schmitz-medical.com

Service technique, hotline :

tél. +49 (0)2377 84 549

téléc. +49 (0)2377 84 210

service@schmitz-medical.com

Visitez notre site internet pour plus d'informations concernant nos agences à l'étranger.

www.schmitz-medical.com



* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM.

Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimales variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis.

Prix forfaitaire 3,00 Euro

Catalogue SCHMITZ No. 88, 04.2025 FR